Luchtgedreven tandpolijstsysteem

Prophy-Mate neo

GEBRUIKSAANWIJZING



OM-DT0952NL 000

MADE IN JAPAN

CE 0197

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Prophy-Mate Neo van NSK.
Dit product is een handstuk voor gebitsreiniging.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze op een toegankelijke plek.

-Inhoud-

Kenmerken ····· 1
⚠ Veiligheidsinstructies ····· 2
1. Type Prophy-Mate neo ····· 3
2. Inhoud verpakking ····· 4
3. Gebruik ····· 5
4. Onderhoud na gebruik ····· 8
5. Reiniging en sterilisatie ····· 12
6. Problemen oplossen ····· 14

Kenmerken

- De 360°draaibare verbinding tussen het handstuk en de slang van het poederreservoir zorgt ervoor dat u zelfs bij een hoge luchtdruk vrij kunt bewegen. Het handstuk draait zo makkelijk dat zelfs moeilijk te bereiken zones eenvoudig toegankelijk zijn. De Prophy-Mate neo is ontwikkeld om ook bij langdurig gebruik vermoeidheid in de hand en pols te minimaliseren.
- Dankzij de twee meegeleverde mondstukjes van 60º en 80º zijn alle tandoppervlakken eenvoudig te bereiken en heeft u onbelemmerd zicht.
- Omdat het meegeleverde FLASH pearl-reinigingspoeder voornamelijk uit calciumcarbonaat bestaat, is het ook geschikt voor patiënten met een natriumbeperking.
- Het meegeleverde FLASH pearl-reinigingspoeder verwijdert vlekken en tandsteen zeer doeltreffend. Daardoor kunnen ingrepen snel en efficiënt worden uitgevoerd, een voordeel voor zowel de gebruiker als de patiënt.

⚠ Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en bediening

- Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door en gebruik dit product uitsluitend zoals bedoeld of geïnstrueerd.
- De veiligheidsinstructies hebben tot doel om mogelijke gevaren te voorkomen die zouden kunnen leiden tot letsel of schade aan het apparaat. De veiligheidsinstructies zijn als volgt geclassificeerd op basis van het risiconiveau.

⚠ WAARSCHUWING	Risico dat kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat als de veiligheidsvoorschriften niet goed worden opgevolgd.
⚠ VOORZICHTIG	Risico dat kan leiden tot licht of matig letsel of schade aan het apparaat als de veiligheidsvoorschriften niet goed worden opgevolgd.
OPMERKING	Algemene productinformatie om storingen en prestatieverlies van het product te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING

- Dit instrument is uitsluitend bestemd voor gebruik door tandartsen en mondhygiënisten.
- Gebruik het instrument niet voor de volgende patiënten:
  <FLASH pearl en reinigingspoeder>
  1) Patiënten met luchtwegaandoeningen.
  2) Patiënten met diepe pathologische parodontale pockets (6 mm of meer) of mucosale laesies. Als de straal langere tijd op zacht weefsel of op de omgeving van de speekselklieren wordt gericht, kan daar poeder in binnendringen. Dit kan in zeer zeldzame gevallen leiden tot emfyseem.
  3) Patiënten met ernstige zweren in de spijsverteringsorganen.
  4) Patiënten met leverdisfunctie.
  5) Patiënten met long- of hartstoornissen of een verminderd ademhalingsvermogen.
  6) Patiënten met beschadigingen of afwijkingen in de mondholte.
  7) Patiënten met hyperemie, bloedingen of ontstekingen in de mondholte.
  8) Patiënten die snel ontstekingen of zweren ontwikkelen in het mondslijmvlies.
  9) Patiënten met allergieën.
  10) Patiënten met contactlenzen.
  11) Afhankelijk van de conditie van de patiënt kan deze in zeer zeldzame gevallen last krijgen van allergiesymptomen of stomatitis. Staak het gebruik van het product onmiddellijk als u dergelijke symptomen opmerkt.

  <Alleen reinigingspoeder>
  Patiënten met een natriumbeperking (hypernatriëmie, gestose, nierfalen, chronische luchtwegaandoeningen en chronische diarree). Het gebruik van reinigingspoeder zou kunnen leiden tot een te hoge inname van natrium, waardoor deze aandoeningen zouden kunnen verslechteren.
- Tijdens het gebruik dient zowel de gebruiker als de assistent altijd een veiligheidsbril en een beschermingsmasker te dragen. De patiënt dient een veiligheidsbril te dragen. Daarnaast wordt aangeraden om de Prophy-Mate neo te gebruiken in combinatie met een afzuigsysteem met hoog volume. Indien er poeder in de ogen terechtkomt, de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en een oogarts raadplegen.
- Richt de straal nooit rechtstreeks op tandcement, poreus tandglazuur, vulmaterialen, randen van tandprothesen en vulmaterialen, kronen, etc.
- Breng Vaseline of een soortgelijk product aan op de lippen van de patiënt om droge lippen of gescheurde mondhoeken te voorkomen.
- Een hogere luchtdruk kan ervoor zorgen dat het poederreservoir en het deksel van het poederreservoir barsten of breken, met mogelijk letsel als gevolg.

⚠ VOORZICHTIG

- Zorg dat de perslucht droog en schoon is. Water of olie in de lucht kan ervoor zorgen dat het reinigingspoeder hard wordt.
- Draai de bovenkant van het poederreservoir goed vast en open deze nooit tijdens het gebruik.
- Controleer voordat u de Prophy-Mate neo aansluit of alle aansluitingen volkomen droog zijn.
- Gebruik reinigingspoeder van NSK. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen of problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van reinigingspoeder van een ander merk.
- Vul het poederreservoir met één zakje FLASH pearl per keer. Gooi reinigingspoeder dat na gebruik nog in het poederreservoir zit weg om verstopping te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend nieuwe, ongeopende zakjes FLASH pearl. Geopende zakjes trekken vocht aan en het poeder zal gaan klonteren in het handstuk.

1 Type Prophy-Mate neo

Type slangaansluiting	Model
NSK PHATELUS-koppeling	PMNG-PTL-P
NSK QD-J-koppeling	PMNG-QD-P
ISO-aansluiting (4 gaten)	PMNG-M4-P
ISO-aansluiting (2 of 3 gaten)	PMNG-B2-P
KaVo® MULTIflex®- of MULTIflex® LUX-koppeling	PMNG-KV-P
W&H® Roto Quick®-koppeling	PMNG-WH-P
Bien-Air® Unifix®- of Unifix® L-koppeling	PMNG-BA-P
Sirona®-snelkoppeling	PMNG-SR-P


KaVo® en LULTIflex® zijn geregistreerde handelsmerken van Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Duitsland.
W&H® en Roto Quick® zijn geregistreerde handelsmerken van W&H dentalwerk Burmoos GmbH, Oostenrijk.
Bien-Air® en Unifix® zijn geregistreerde handelsmerken van Bien-Air Dental S.A., Zwitserland.
Sirona® is een geregistreerd handelsmerk van Sirona Dental System GmbH, Duitsland.

2 Inhoud verpakking

Prophy-Mate neo-handstuk	1
Mondstukje	1 van 60° en 1 van 80° (Het mondstukje van 60° is al op het handstuk gemonteerd.)
Poederreservoir	1
Onderhoudsset	
Mondstukdraad	Groot: 1 voor de basis van het mondstukje Klein: 1 voor de tip van het mondstukje en de binnenmondstukjes
Reinigingsdraad	1 (voor andere toepassingen)
Reinigingskwastje	1
Reinigingspoeder (FLASH pearl)	5 zakjes
Mondstuksleutel	1
Olie	1
Blaasmond	1 (kan worden aangesloten op de koppeling om met behulp van droge lucht poederresten te verwijderen van de onderdelen van de Prophy-Mate neo)
Reserveonderdelen	
Deksel poederreservoir	2 (gebruik er 1 om het poederreservoir af te sluiten)
O-ringen (uiteinde handstuk)	1 set
O-ringen (uiteinde koppeling)	1 set (uitsluitend voor de NSK PHATELUS-koppeling)

* De onderhoudsset en reserveonderdelen kunnen worden opgeborgen in de accessoirekoffer.

Onderdeel

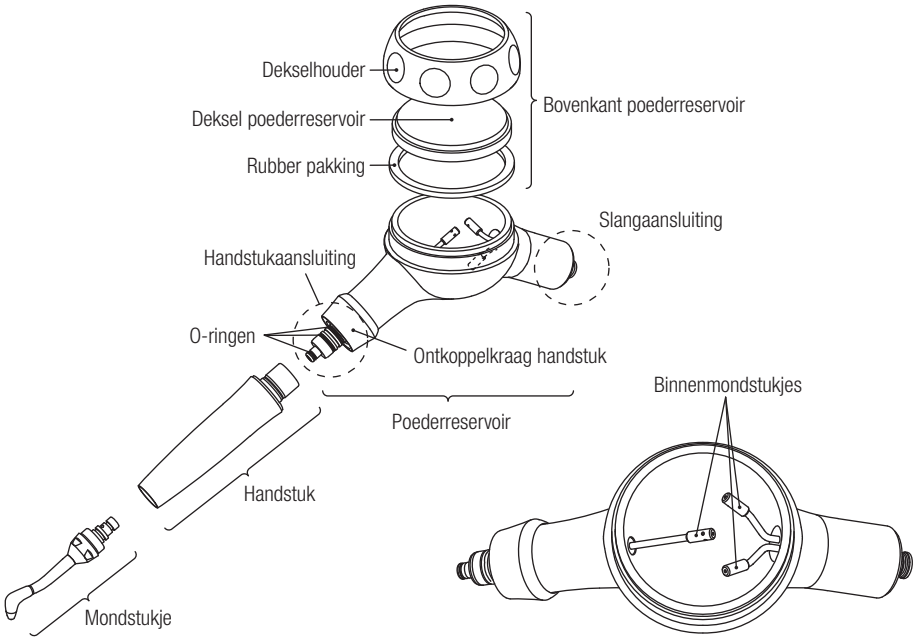

3 Gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Vermijd langdurig continu gebruik en laat de patiënt af en toe spoelen.
- Vermijd stoten of gooien met het poederreservoir en de bovenkant van het poederreservoir, hierdoor kunnen deze barsten of breken.
- Demonteer de Prophy-Mate neo nooit tijdens gebruik. Trek nooit aan de ontkoppelkraag van het handstuk of de ontgrendeling van de koppeling als het apparaat in gebruik is. Als u dit wel probeert, kunnen onderdelen van de Prophy-Mate neo en het reinigingspoeder wegschieten.
- Gebruik dit product uitsluitend met de juiste luchtdruk.
- Droog de Prophy-Mate neo en alle onderdelen aan de binnen- en buitenkant grondig af voor gebruik.

⚠ VOORZICHTIG

- Voorkom dat het reinigingspoeder op andere slijmvliezen (ogen, neus, etc.) dan die in de mond terechtkomt. Bescherm het gezicht met een bijvoorbeeld een handdoek of een veiligheidsbril om te voorkomen dat er reinigingspoeder in de ogen terechtkomt.
  * Als de patiënt contactlenzen draagt, moeten die voor de behandeling worden verwijderd.
- Veeg chemicaliën, oliën, etc. die op het deksel van het poederreservoir terechtkomen onmiddellijk weg. Als u ze laat zitten, kan het deksel barsten of breken.

3-1 Luchtdruk

Stel de luchtdruk van de aansluiting van de handstukslang in op 0,27 - 0,40 MPa (2,7 - 4,0 kgf/cm^2).


⚠ WAARSCHUWING

- Een hogere luchtdruk kan ervoor zorgen dat het poederreservoir en de bovenkant van het poederreservoir barsten of breken, met mogelijk letsel als gevolg.

3-2 Het poederreservoir aansluiten op de handstukslang

⚠ VOORZICHTIG

- Droog de koppeling, het handstuk de slangaansluiting van het poederreservoir, de binnenkant van het poederreservoir en het mondstukje grondig af voordat u alle onderdelen aansluit.
  Laat het apparaat bovendien even alleen lucht blazen om water binnenin af te voeren.

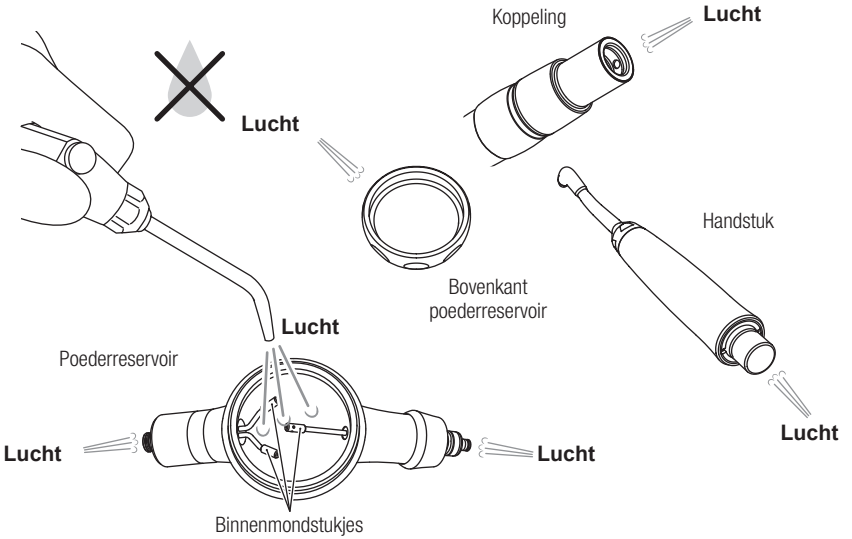


Sluit de slang aan op het poederreservoir.

- PMNG-PTL-P
  Sluit de FM-CL- (2/3/4 gaten), PTL-CL-4HV- (6 pinnen) of PTL-CL-FV-koppeling (5 gaten) aan op de handstukslang. Als een van deze koppelingen al op de handstukslang zit, kunt u het Prophy-Mate neo-handstuk simpelweg op de koppeling klikken.
- Type poederreservoir met 4, 3 of 2 gaten (PMNG-M4-P, PMNG-B2-P)
  Sluit het poederreservoir rechtstreeks aan op de bijbehorende handstukslang. Draai de slangmoer goed aan.
- Gebruik in combinatie met koppelingen van andere fabrikanten
  (PMNG-QD-P, PMNG-KV-P, PMNG-WH-P, PMNG-BA-P, PMNG-SR-P)
  Lees de gebruiksaanwijzing van uw koppeling door en sluit de Prophy-Mate neo dienovereenkomstig aan.

3-3 Het handstuk aansluiten op het poederreservoir

Trek de ontkoppelkraag van het poederreservoir naar achter en druk het handstuk in een rechte lijn op de aansluiting. Laat de ontkoppelkraag los als het handstuk op zijn plaats zit (Afb.1). Trek na het aansluiten zachtjes aan het handstuk om te controleren of het goed vastzit.

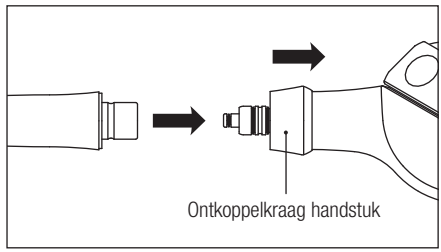


Afb. 1

3-4 Het reservoir vullen met reinigingspoeder

Maak één zakje reinigingspoeder open en giet het in het poederreservoir.

Draai de bovenkant van het poederreservoir altijd goed dicht na het openen en sluiten. (Afb. 2)

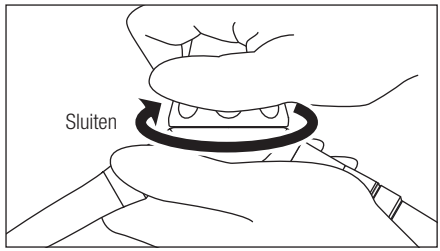


Afb. 2

■ Bij gebruik van een fles FLASH Pearl (optioneel)

Open de bovenkant van het poederreservoir en vul het reservoir met poeder tot aan de binnenmondstukjes (Afb. 3). Draai de bovenkant van het reservoir stevig dicht.

FLASH pearl (fles à 300 gms x 4)
Bestelnr. Y900698

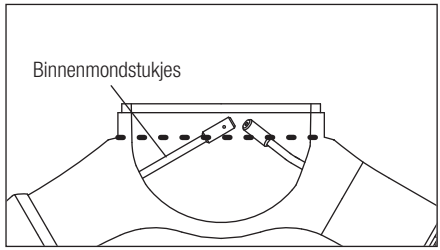


Afb. 3

VOORZICHTIG

- Gooi resterend poeder altijd weg. Bewaar geopende zakjes niet voor later gebruik. Poeder in geopende zakjes trekt vocht aan, waardoor de poederkanaaltjes verstoppen.
- Gebruik reinigingspoeder van NSK. Reinigingspoeder van andere merken kan deeltjes van een ander formaat bevatten, waardoor het apparaat kan verstoppen en niet optimaal kan presteren.

3-5 Gebruik

Laat de Prophy-Mate neo na het vullen van het reservoir 2 tot 3 seconden blazen boven een spuugbakje om te controleren of de poeder-/waterstraal goed werkt voordat u het apparaat op een patiënt gebruikt. Houd het mondstukje op 3 tot 5 mm van het tandoppervlak, in hoeken van 10 tot 60 graden (werk bij gebruik van PROPHY MATE-reinigingspoeder met hoeken van 60 tot 90 graden).

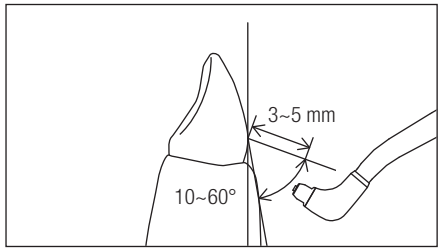

Afb. 4

VOORZICHTIG

- Richt de straal nooit op zacht weefsel, tandvlees of subgingivale zones.
- Gebruik een afzuigsysteem met hoog volume en wattenrollen om te voorkomen dat de patiënt grote hoeveelheden reinigingspoeder binnenkrijgt. Vermijd langdurig continu gebruik en laat de patiënt af en toe spoelen.

4 Onderhoud na gebruik

⚠ WAARSCHUWING

- Organische oplosmiddelen, etc. die zich aan de bovenkant van het poederreservoir hechten, kunnen ervoor zorgen dat de bovenkant barst of breekt.
- Het deksel van het poederreservoir zal na verloop van tijd worden aangetast door uv-straling en andere omgevingsfactoren en wordt daarom beschouwd als een verbruiksartikel. Vervang het deksel van het poederreservoir om de zes maanden.
- Reinig het poederreservoir, de bovenkant van het poederreservoir en de schroefdraad van het poederreservoir en van de bovenkant van het poederreservoir altijd zorgvuldig. Doe dit eenmaal per week en controleer het deksel en de bovenkant van het poederreservoir op krassen en barsten.
- Vervang de bovenkant van het poederreservoir of het poederreservoir altijd direct als u barsten ontdekt. In dat geval kan het deksel van het poederreservoir breken en de stukken kunnen letsel veroorzaken.
- Om verstopping te voorkomen, reinigt u de complete Prophy-Mate neo eenmaal per week in een ultrasoon bad (zie 5-1 Ultrasone reiniging).

⚠ VOORZICHTIG


- Neem in geval van storing contact op met uw dealer op het apparaat te laten repareren.
- Reinig het apparaat altijd grondig van binnen en van buiten na gebruik. Zorg ervoor dat alle poederresten zijn verwijderd en dat het apparaat volledig droog is voordat u het opbergt.
- De Prophy-Mate neo mag nooit worden geolied (alleen de O-ringen mogen worden geolied met de meegeleverde turbineolie (zie 4-4 Oliën).

OPMERKING

- FLASH pearl is bijna oplosbaar in water. De vacuümslang, speekselafzuiger en separator moeten periodiek worden gereinigd en onderhouden om verstopping van de leidingen door het gebruik van FLASH pearl te voorkomen.


4-1 Reinigingspoeder verwijderen

1) Open de bovenkant van het poederreservoir en verwijder het overgebleven reinigingspoeder. (Afb. 5)

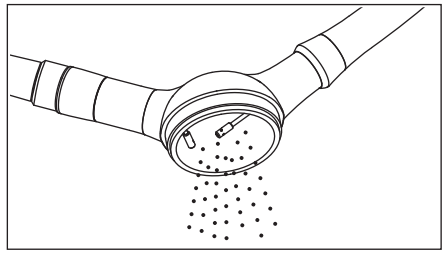

Afb. 5


2) Laat het apparaat alleen lucht blazen om water en poeder in het mondstukje te verwijderen (Afb. 6).

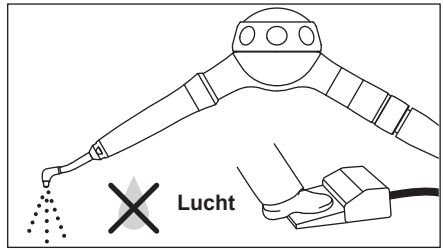

Afb. 6

3) Blaas resterend poeder in het poederreservoir weg met lucht. (Afb. 7)


4) Veeg het mondstukje en het handstuk schoon met een zachte, in alcohol gedrenkte doek om speeksel en andere fysische verontreinigingen te verwijderen.

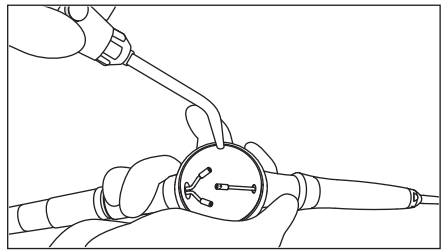


Afb. 7

4-2 Reinigingspoeder verwijderen uit het poederreservoir, handstuk en mondstukje

1) Maak het poederreservoir los van de slang.
2) Trek de ontkoppelkraag van het handstuk naar achteren en verwijder het handstuk.
3) Verwijder het mondstukje met de mondstuksleutel. (Afb. 8)
4) Plaats de meegeleverde blaasmond op de koppeling en bevestig deze op het handstuk. Laat langer dan 5 seconden zonder water blazen om de leidingen schoon te blazen. (Afb. 9)

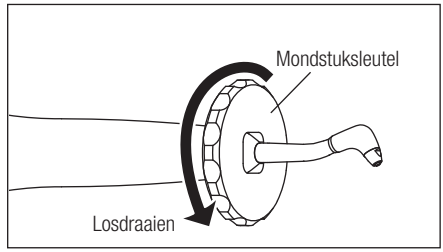


Afb. 8

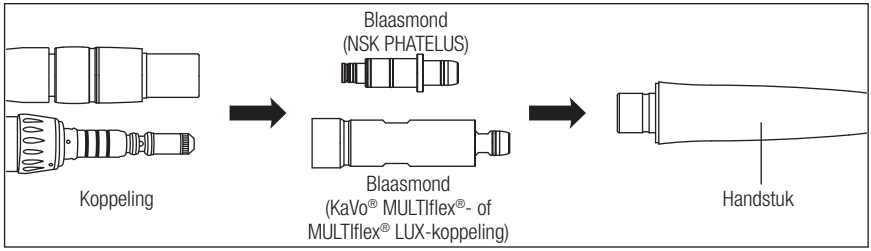

* Ook voor koppelingen van andere merken zijn er blaasmonden verkrijgbaar.

Afb. 9

Gebruik de blaasmond op dezelfde manier om de leidingen in het mondstukje van de Prophy-Mate neo schoon te blazen. Blaas vanaf de tip van het mondstukje.

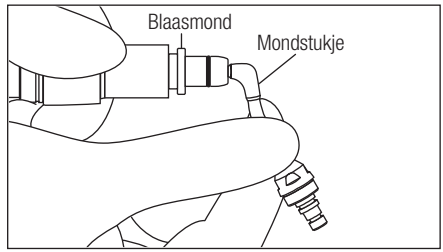


Afb. 10

⚠ VOORZICHTIG

- Houd de onderdelen stevig vast als u het apparaat leeg laat blazen.


4-3 Reinigen en wassen

1) Reinig de binnenkant van de aansluiting van het handstuk en het O-ringstuk van het poederreservoir zorgvuldig met het meegeleverde reinigingskwastje. (Afb. 11)

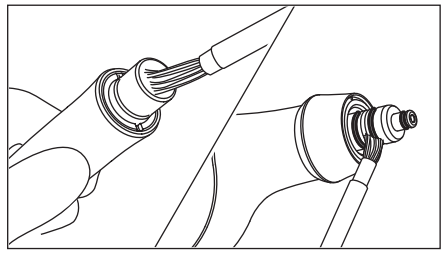


Afb. 11

Verwijder de O-ringen als er poeder is achtergebleven en reinig de ringen en de groeven zorgvuldig. (Afb. 12)

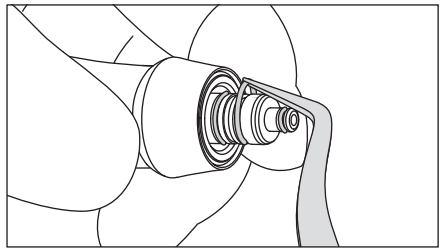


Afb. 12

2) Verwijder de rubber pakking en haal de bovenkant van het poederreservoir uit elkaar. (Afb. 13)

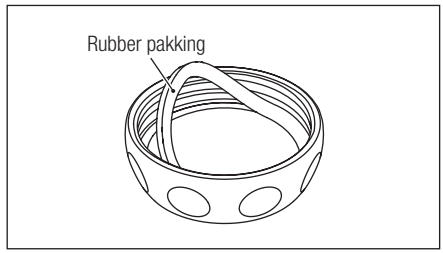

Afb. 13

3) Spoel reinigingspoeder dat aan de binnenkant van het poederreservoir of de bovenkant blijft plakken weg onder stromend water. (Afb. 14)

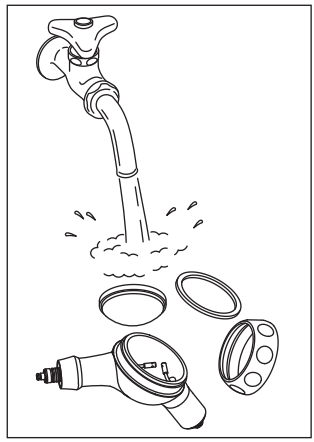

Afb. 14

4) Droog het deksel, de rubber pakking en de dekselhouder van het poederreservoir af en zet ze weer in elkaar.


⚠ VOORZICHTIG

- Achtergebleven poeder in het poederreservoir zal gaan samenklonteren, wat tot verstopping kan leiden.

4-4 Oliën

1) Droog het O-ringstuk van het poederreservoir af, breng een druppel van de meegeleverde turbineolie aan en wrijf deze in met uw vinger. (Afb. 15)

2) Steriliseer in de autoclaaf.

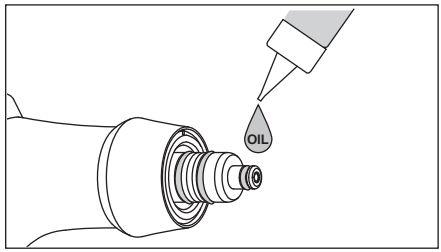

Afb. 15

⚠ VOORZICHTIG

- Als de O-ringen niet regelmatig worden geolied, kan de aansluiting tussen het poederreservoir en het handstuk beschadigd raken. Daardoor kunnen het poederreservoir en het handstuk mogelijk niet meer vrij draaien en kan de aansluiting gaan lekken.

5 Reiniging en sterilisatie



Alleen het handstuk van de Prophy-Mate neo kan in een thermodesinfector worden gereinigd. Het poederreservoir en de bovenkant van het poederreservoir mogen niet in de thermodesinfector.

5-1 Ultrasone reiniging

⚠ VOORZICHTIG

- Reinig de Prophy-Mate neo eenmaal per week in een ultrasoon bad om verstopping te voorkomen.

1) Haal het apparaat uit elkaar en reinig het (zie 4-1 Reinigingspoeder verwijderen t/m 4-3 Reinigen en wassen).
2) Plaats de meegeleverde mondstuksleutel op de tip van het mondstukje. Draai het mondstukje los en haal het van het handstuk.
3) Voer de ultrasone reiniging van het handstuk, poederreservoir en mondstukje uit met heet water.
4) Blaas na het reinigen met droge lucht de waterdruppels van alle onderdelen.
5) Zet het apparaat weer in elkaar door het demontageproces in omgekeerde volgorde uit te voeren.
6) Sluit het poederreservoir zonder de bovenkant van het poederreservoir aan op de slang en laat het apparaat leeg blazen om water uit de leidingen te verwijderen.

⚠ VOORZICHTIG

- Draai als u het mondstukje plaatst dit eerst met de hand lichtjes aan en gebruik vervolgens de mondstuksleutel om het vast te draaien.
- Droog met name de binnenkant van het poederreservoir goed af.

5-2 Steriliseren

- Steriliseren door middel van een autoclaaf wordt aanbevolen. Voor het eerste gebruik en na elke patiënt moeten de betreffende onderdelen worden gesteriliseerd.
- Alle onderdelen kunnen worden geautoclaveerd.

■ Autoclaveren


1) Haal het apparaat uit elkaar en reinig het (zie 4-1 Reinigingspoeder verwijderen t/m 4-4 Oliën).
2) Doe het handstuk in een autoclaafzak. Seal de zak.
3) Autoclaveer tot max. 135°C.
   Voorbeeld: autoclaveer 20 minuten op 121°C of 15 minuten op 132°C.
4) Bewaar het handstuk tot het volgende gebruik in de autoclaafzak. Zet het apparaat voor gebruik weer in elkaar door het demontageproces in omgekeerde volgorde uit te voeren.


* Overeenkomstig EN13060 of EN ISO17665-1 wordt sterilisatie gedurende meer dan 15 minuten op 121°C aanbevolen.



⚠
VOORZICHTIG

- Droog alle onderdelen voor gebruik grondig af.
- Verwijder de bovenkant van het poederreservoir en steriliseer de onderdelen in de autoclaaf. Als u de bovenkant tijdens het steriliseren op het poederreservoir laat zitten, kan het deksel breken.
- Wanneer de onderdelen in de autoclaaf worden gesteriliseerd met andere instrumenten/materialen waarop zich chemicaliën bevinden, kan hun coating loskomen of de binnenkant worden aangetast. Let er dus goed op dat er geen chemicaliën in de autoclaaf terechtkomen.
- Plaats de onderdelen in de autoclaaf nooit dicht bij het verwarmingselement, aangezien de ingestelde temperatuur in de buurt van het verwarmingselement soms wordt overschreden.
- Niet schoonvegen of reinigen met of onderdompelen in sterk zuur water of sterilisatieoplossingen.

6 Problemen oplossen

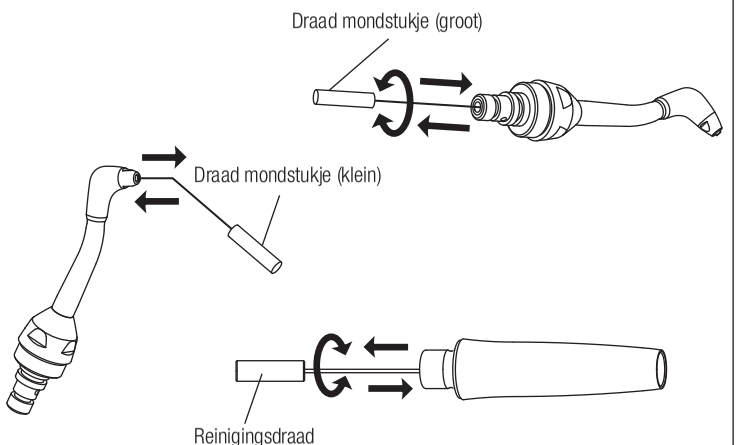Probleem	Controle	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komt geen lucht-/poederstraal uit.	Als het handstuk is verwijderd en er lucht wordt toegevoerd, komt de lucht-/poederstraal uit de aansluiting van het handstuk.	Het handstuk is verstopt door poeder.	Draai het mondstukje los met de meegeleverde mondstuksleutel en verwijder het mondstukje van het handstuk. Reinig de tip van het mondstukje met de kleine mondstukdraad en de basis met de grote mondstukdraad. Reinig ook de binnenkant van het handstuk met de reinigingsdraad. Komt er vervolgens nog steeds geen lucht-/poederstraal uit, voer dan een ultrasone reiniging uit met heet water. (zie 5-1 Ultrasone reiniging). 

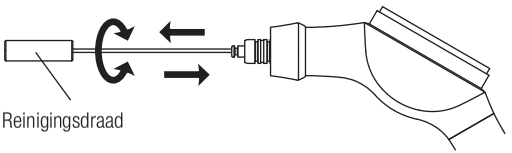	Ook als het handstuk is verwijderd, komt er geen lucht-/poederstraal uit de aansluiting van het handstuk als er lucht wordt toegevoerd.	Het poederreservoir is verstopt door poeder.	Duw de reinigingsdraad al draaiende door het gat in het midden van de tip van de handstukaansluiting van het poederreservoir en reinig ook de inlaten van de binnenmondstukjes met de grote mondstukdraad. Komt er vervolgens nog steeds geen lucht-/poederstraal uit, voer dan een ultrasone reiniging uit met heet water. (zie 5-1 Ultrasone reiniging). 
Er lekt water uit de aansluiting tussen het handstuk en het poederreservoir.	Controleer de O-ringen van de handstukaansluiting van het poederreservoir.	(Een van) de O-ring(en) is beschadigd.	Vervang de O-ring(en) van de handstukaansluiting van het poederreservoir. Breng een druppel van de meegeleverde turbineolie aan en wrijf deze in met uw vinger of ander materiaal (zie 4-3 Reinigen en wassen t/m 4-4 Oliën).
De verbinding tussen het poederreservoir en het handstuk draait moeizaam.	Controleer de O-ringen van de handstukaansluiting van het poederreservoir.	Er is reinigingspoeder in de groeven van de O-ring(en) terechtgekomen, waardoor de koppeling niet goed aansluit.	Verwijder de O-ringen van de handstukaansluiting van het poederreservoir. Verwijder het poeder zorgvuldig van de groeven en O-ringen met het meegeleverde reinigingskwastje. Veeg de handstukaansluiting vervolgens zorgvuldig schoon met een in alcohol gedrenkte doek. Breng een druppel van de meegeleverde turbineolie aan en wrijf deze in met uw vinger of ander materiaal (zie 4-3 Reinigen en wassen t/m 4-4 Oliën).
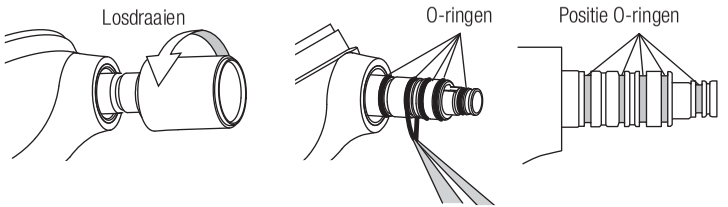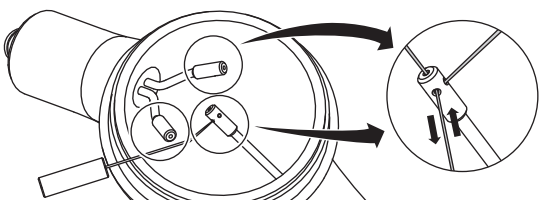
<table>
<tr><td rowspan="4">De lucht-/poederstraal is zwak, net als het reinigend vermogen.</td><td rowspan="3">Het reinigingspoeder is deels hard geworden in het reservoir.</td><td>Het reinigingspoeder heeft te lang in het reservoir gezeten.</td><td>Vervang het door nieuw poeder.</td></tr>
<tr><td>De toegevoerde lucht bevat water.</td><td>Controleer in het geval van een PHATELUS-koppeling of de O-ringen van de koppeling kapot zijn. Vervang de O-ringen als dit het geval is. Controleer in het geval van andere koppelingen welk model koppeling u gebruikt.

</td></tr>
<tr><td>Maak de afvoeren van het filter en de compressor van de luchttoevoer open en controleer of er zich water heeft verzameld.</td></tr>
<tr><td>Het reinigingspoeder is deels hard geworden in het handstuk of het poederreservoir, waardoor de doorgang kleiner is geworden.</td><td>Het reinigingspoeder is deels hard geworden door vocht, etc. in de luchtleiding.</td><td>Reinig de leiding door de kleine mondstukdraad al draaiende naar binnen te duwen en blaas resterend poeder weg met lucht. Zorgt dat niet voor verbetering, voer dan een ultrasone reiniging uit met heet water. Zorg dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer gebruikt. (zie 5-1 Ultrasone reiniging).
</td></tr>
</table>

* Neem contact op met uw dealer als het probleem na bovenstaande maatregelen niet verholpen is.

CE 2610 Het ontwerp en de productie van dit medische hulpmiddel voldoen aan de Europese richtlijn 93/42/EEC.

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH EC REP
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

Bezoek onze website

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2021-10-18