Suruõhuga hammaste poleerimissüsteem

Prophy-Mate neo

KASUTUSJUHEND

Lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult enne kasutamist ja hoidke edaspidi lugemiseks alles.



OM-DT0964ET 000

MADE IN JAPAN

CE 0197

Täname, et ostsite NSK Prophy-Mate neo.
See toode on hammaste puhastamise käsiseade.
Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda kohas, kus saate seda igal ajal vaadata.

Sisukord

Omadused ····· 1
⚠ Käsitsemise ja kasutamise ettevaatusabinõud ····· 2
1. Prophy-Mate neo tüüp ····· 3
2. Pakendi tavapärane sisu ····· 4
3. Kasutamine ····· 5
4. Hooldus pärast kasutamist ····· 8
5. Puhastamine ja steriliseerimine ····· 12
6. Tõrkeotsing ····· 14

Omadused

- Käsiseadme lõpus ja pulbri ümbrise vooliku otsas olev 360-kraadine mittekeerduv pöördliigend võimaldab sujuvat kasutamist isegi kõrge õhusurve korral. Käsiseadet saab hõlpsalt pöörata, mis võimaldab hõlpsalt pääseda juurde raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Prophy-Mate neo on loodud vähendama pingutamist ja väsimust isegi pikaajalise töö ajal.
- 60º ja 80º otsaku valik võimaldab hõlpsalt jõuda kõikide hambapindadeni ja ei takista vaadet.
- Kuna komplekti kuuluv puhastuspulber FLASH pearl koosneb suures osas kaltsiumkarbonaadist, sobib see kasutamiseks patsientidel, kelle puhul naatriumi kasutus peab olema piiratud.
- Kaasasolev pulber FLASH pearl eemaldab tõhusalt plekke ja hambakattu, mistõttu saab protseduure viia läbi kiiresti ja tõhusalt ning sellest saavad kasu nii kasutaja kui ka patsient.

⚠ Käsitsemise ja kasutamise ettevaatusabinõud

■ Lugege neid ettevaatusabinõusid hoolikalt ja kasutage ainult ettenähtud viisil või juhendi kohaselt.
■ Ohutusjuhised on mõeldud selleks, et vältida võimalikke ohte, mis võivad põhjustada kehavigastusi või seadme kahjustamist. Ohutusjuhised liigitatakse vastavalt ohu tõsidusele järgmiselt.

⚠ HOIATUS	Oht, mis võib ohutusjuhiste mittejärgimisel põhjustada kehavigastusi või seadme kahjustusi.
⚠ ETTEVAATUST	Oht, mis võib ohutusjuhiste mittejärgimisel põhjustada kergeid või mõõdukaid kehavigastusi või seadme kahjustamist.
MÄRKUS	Toote tõrgete ja jõudluse vähenemise vältimiseks on toote tehniliste andmete üldteave esile tõstetud.

⚠ HOIATUS

- See seade on mõeldud kasutamiseks ainult hambaarstide ja hügieenikute poolt.
- Mitte kasutada järgmistel patsientidel

<FLASH pearl ja puhastuspulber>

1) Kellel on hingamisteede haigus.
2) Kellel on patoloogiliselt sügavad periodontaalsed taskud (6 mm või rohkem) või limaskesta kahjustus. Joa pikaaegsel kasutamisel pehmete kudede või süljenäärmete läheduses võib pulbriga õhk neisse siseneda ja väga harvadel juhtudel põhjustada emfüseemi.
3) Kellel on seedeorganites suured haavandid.
4) Kellel on maksafunktsiooni häired.
5) Kellel on kopsu- või südame rütmihäire või hingamisraskused.
6) Kellel on suuõõnsuses kahjustus või kõrvalekalded.
7) Kellel on suuõõnsuses hüpereemia, verejooks või põletik.
8) Kellel kipub tekkima suu limaskesta põletik või haavandid.
9) Kellel on allergiad.
10) Kes kannavad kontaktläätsi.
11) Sõltuvalt patsiendi seisundist võivad väga harvadel juhtudel tekkida allergia sümptomid või stomatiit. Selliste sümptomite tuvastamisel lõpetage kohe toote kasutamine.

<Ainult puhastuspulber>

Kes peavad naatriumi tarbimist piirama (hüpernatreemia, gestoosid, neerupuudulikkus, kroonilised hingamisteede haigused ja krooniline kõhulahtisus). Puhastuspulbri kasutamine võib põhjustada naatriumi liigset kehasse sattumist, mis võib põhjustada seisundite halvenemist.

- Kasutamise ajal peavad nii kasutaja kui ka assistent kandma alati kaitseprille ja kaitsvat näomaski. Patsient peab kandma kaitseprille. Samuti on Prophy-Mate neo kasutamise ajal soovitatav kasutada suure võimsusega imemist. Pulbri silma sattumisel loputage kohe rohke veega ja pidage nõu silmaarstiga.
- Ärge kunagi suunake juga otse hambajuurtele, ilma kaltsiumita hambaemailile, täitematerjalidele, proteeside ja täitematerjalide servadele, kroonidele jne.

- Kandke patsiendi huultele vaseliini vms, et vältida suunurkade kuivamist või lõhenemist.
- Kõrgem õhusurve võib põhjustada pulbri ümbrise ja pulbri ümbrise katte pragunemist või purunemist, mis võib põhjustada vigastusi.

⚠ETTEVAATUST

- Veenduge, et suruõhk oleks kuiv ja puhas. Õhuga segunenud vesi või õli võib põhjustada puhastuspulbri sisemist tahkumist.
- Keerake pulbri ümbrise kate kindlalt kinni ja ärge kunagi avage pulbri ümbrise katet töötamise ajal.
- Enne Prophy-Mate neo ühendamist veenduge, et kõik ühendused oleksid täiesti kuivad.
- Kasutade NSK valmistatud puhastuspulbrit. Me ei vastuta rikete eest, mille on põhjustatud muu ettevõtte puhastuspulbri kasutamine.
- Kasutage pulbri ümbrise täitmiseks korraga ühte FLASH pearli kotikest. Ummistus vältimiseks visake pärast kasutamist ümbrisesse jäänud puhastuspulber ära.
- Veenduge, et kasutaksite ainult uut avamata FLASH pearli kotikest. Avatud kotikesed imavad niiskust ja pulber jääb käsiseadmesse kinni.

1. Prophy-Mate neo tüüp

Voolikuühenduse tüüp	Mudel
NSK PHATELUS-liitmik	PMNG-PTL-P
NSK QD-J liiitmiku tüüp	PMNG-QD-P
ISO nelja avaga liide	PMNG-M4-P
ISO kahe või kolme avaga liide	PMNG-B2-P
Liitmik KaVo® MULTIflex® või MULTIflex® LUX	PMNG-KV-P
Liitmik W&H® Roto Quick®	PMNG-WH-P
Liitmik Bien-Air® Unifix® või Unifix® L	PMNG-BA-P
Kiirliitmik Sirona®	PMNG-SR-P


KaVo® ja LULTIflex® on ettevõtte Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. (Saksamaa) registreeritud kaubamärgid.
W&H® ja Roto Quick® on ettevõtte W&H dentalwerk Burmoos GmbH (Austria) registreeritud kaubamärgid.
Biem-Air® ja Unifix® on Bien-Air Dental S.A. (Šveits) registreeritud kaubamärgid.
Sirona® on ettevõtte Sirona Dental System GmbH (Saksamaa) registreeritud kaubamärk.

2. Pakendi tavapärane sisu

Prophy-Mate neo käsiseade	1	
Otsak,	60° ja 80°, kumbagi 1 (60º otsak on juba käsiseadmele paigaldatud.)	
Pulbri ümbris	1	
Hoolduskomplekt		
Otsaku traat	Suur: 1 otsaku allosa jaoks Väike: 1 otsaku tipuosa ja sisemiste otsakute jaoks	
Puhastustraat	1 (teiste kasutuste jaoks)	
Puhastushari	1	
Puhastuspulber (FLASH pearl)	5 kotikest	
Otsaku võti	1	
Õli	1	
Puhuri otsak	1 (Saab ühendada liitmikuga, et edastada kuiva õhku pulbrijääkide eemaldamiseks seadmelt Prophy-Mate neo ja selle komponentidelt)	
Varuosad		
Pulbri ümbrise kate	2	(Üks kinnitatakse pulbri ümbrise külge.)
Rõngastihendid (käsiseadme ots)	1 komplekt	
Rõngastihendid (liitmiku ots)	1 komplekt	(Ainult NSK PHATELUS-liitmik)

✻Hoolduskomplekti ja varuosi hoiustatakse tarvikute karbis.

Osa nimetus

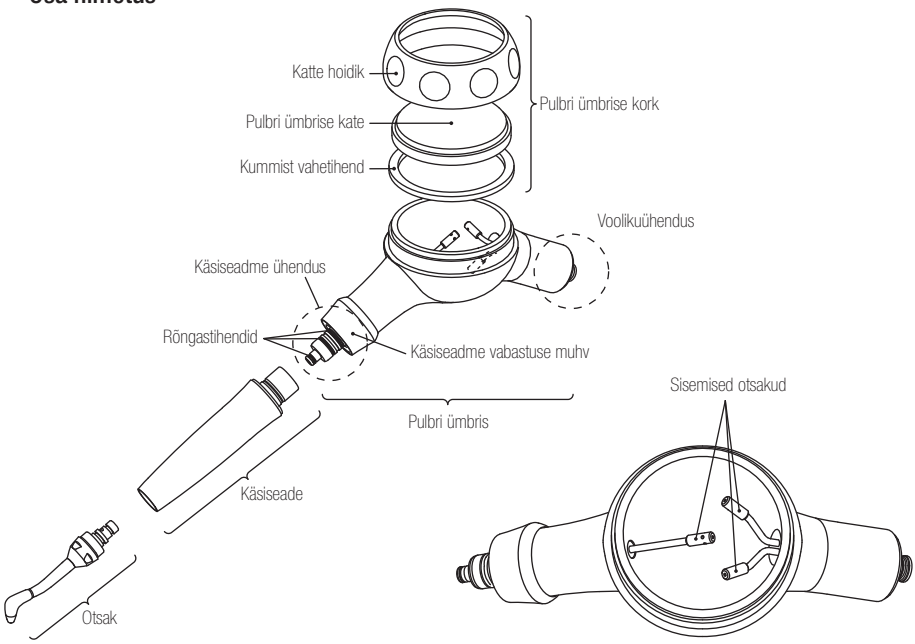

3. Kasutamine

⚠ HOIATUS

- Vältige pikka pidevalt kasutamist ja laske patsiendil sobivatel aegadel suud loputada.
- Ärge kunagi lööge ega koputage vastu pulbri ümbrist ja pulbri ümbrise katet, kuna see võib põhjustada pulbri ümbrise või pulbri ümbrise katte kriimustamist või pragunemist.
- Ärge kunagi võtke seadet Prophy-Mate neo kasutamise ajal osadeks. Ärge kunagi tõmmake kasutamise ajal käsiseadme vabastuse muhvi ega liitmiku vabastust. Selle proovimine võib põhjustada Prophy-Mate neo osade ja puhastuspulbri äralendamist.
- Kasutage seda toodet ainult õige õhusurvega.
- Enne kasutamist kuivatage Prophy-Mate neo ja kõik selle komponendid põhjalikult seest ja väljast.

⚠ ETTEVAATUST

- Olge väga ettevaatlik, et puhastuspulber ei satuks ühelegi teisele limaskestale (silmad, nina jne) peale suuõõne. Samuti kaitske nägu riide või kaitseprillidega vms, et vältida puhastuspulbri sattumist silma.
  ✻ Kui patsient kannab kontaktläätsi, tuleb läätsed enne ravi alustamist eemaldada.
- Kemikaalide, õlide vm pulbri ümbrise katte külge kleepumisel pühkige need kohe ära. Nende selliselt jätmine põhjustab purunemist.

3-1 Õhusurve

Seadke käsiseadme voolikuühenduse õhusurveks 0,27 - 0,40 MPa (2,7 - 4,0 kgf/cm^2).

⚠ HOIATUS


Kõrgem õhusurve võib põhjustada pulbri ümbrise ja pulbri ümbrise korgi pragunemist või purunemist, mis võib põhjustada vigastusi.

3-2 Pulbrikarbi ühendamine käsiinstrumendi voolikuga

⚠ ETTEVAATUST

Enne iga osa ühendamist kuivatage põhjalikult liitmik, käsiseade, pulbri ümbrise vooliku ühendusosa, pulbri ümbrise sisemus ja otsak.

Samuti laske sel ainult õhuga tühikäigul töötada, et kogu sisemine vesi välja puhuda.

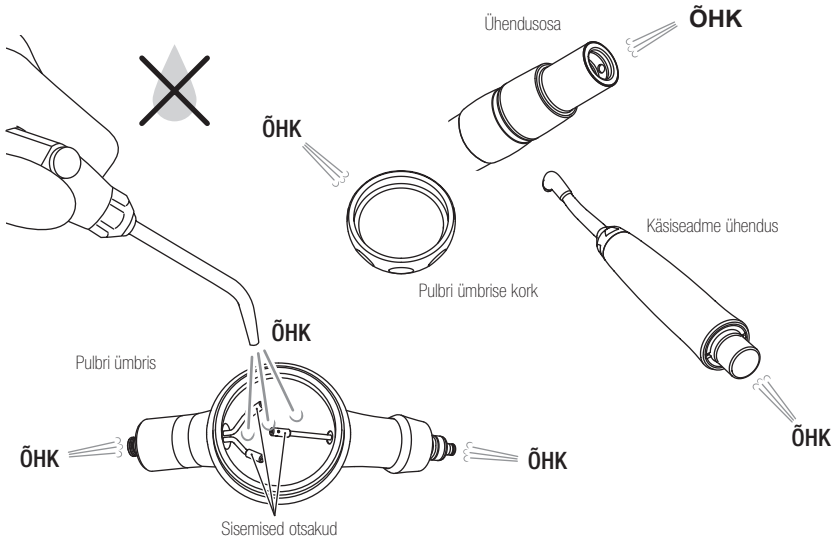


Ühendage voolik pulbri ümbrise külge.

- PMNG-PTL-P
  Ühendage FM-CL (2, 3, 4 avaga), PTL-CL-4HV (6-viigune) või PTL-CL-FV (5 avaga) liitmik käsiseadme voolikuga. Kui teil on mõni neist liitmikest käsiseadme vooliku külge kinnitatud, võite lihtsalt ühendada Prophy-Mate neo käsiseadme klõpsuga liitmiku külge.
- 4 avaga, 3 avaga või 2 avaga tüüpi pulbri ümbris (PMNG-M4-P, PMNG-B2-P)
  Ühendage pulbri ümbris otse vastava käsiseadme voolikuga. Keerake vooliku mutter tugevalt kinni.
- Kasutamise muu tootja käsiseadme liitmikuga
  (PMNG-QD-P, PMNG-KV-P, PMNG-WH-P, PMNG-BA-P, PMNG-SR-P)
  Kontrollige oma liitmiku kasutusjuhendit ja ühendage Prophy-Mate neo vastavalt sellele

3-3 Pulbrikarbi ühendamine käsiseadmega

Tõmmake käsiseadme vabastusmuhv pulbrikarbil tagasi ja lükake käsiseade otse ühendusse. Kui käsiseade on paigal, laske vabastusmuhvist lahti. (Joonis 1) Kui see on ühendatud, tõmmake käsiseadet ettevaatlikult, et tagada õige ühendus.

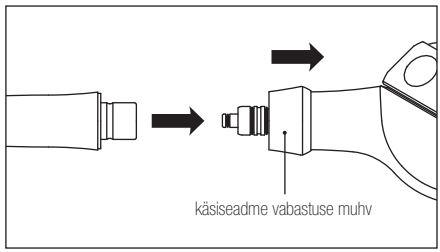


Joonis 1

3-4 Puhastuspulbriga täitmine


Avage puhastuspulbri üks kotike ja täitke sellega pulbrikarp.
Pärast avamist ja sulgemist keerake alati pulbrikarbi kork kinni. (Joonis 2)

■ FLASH Pearli pudeli kasutamisel (valikuline)
Avage pulbri ümbrise kork ja täitke pulbriga sisemise otsakuni (joonis 3) ning keerake pudeli kork tugevasti kinni.

FLASH Pearl (pudeli tüüp sisaldab 300 g × 4)
Tellimisnr Y900698

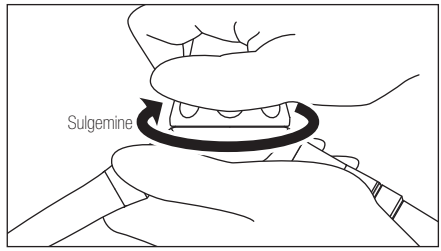

Joonis 2

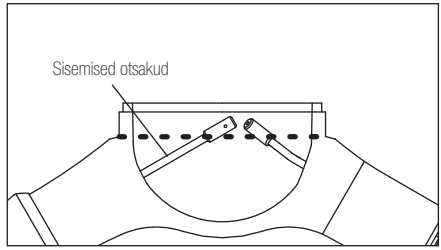


Joonis 3

⚠ ETTEVAATUST

- Visake allesjäänud pulber alati ära. Ärge hoidke avatud kotti hilisemaks kasutamiseks alles. Avatud kottides olev pulber imab niiskust ja ummistab pulbrikanalid.
- Kasutade NSK valmistatud puhastuspulbrit. Teiste ettevõtete puhastuspulber, mille osakeste suurus on erinev, võib põhjustada ummistumist ega anna täielikku jõudlust.

3-5 Kasutamine

Pärast pulbri ümbrise täitmist kasutage seadet Prophy-Mate neo 2 - 3 sekundit süljekausi kohal, et tagada pulbri ja vee hea vool enne seadme patsiendil kasutamist. Kasutage otsakut hambapinnast 3 - 5 mm kaugusel 10 - 60-kraadise nurga all. (Puhastuspulbri PROPHY MATE kasutamisel kasutage 60 - 90-kraadist nurka.)

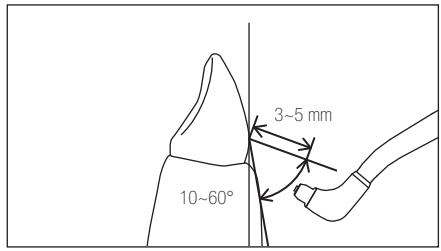

Joonis 4

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge kunagi suunake pehmekoe, igeme ega igemealusesse piirkonda.
- Selleks, et patsient ei neelaks alla suures koguses puhastuspulbrit, kasutage kindlasti koos seadmega Prophy-Mate neo suure võimsusega imemist ja vatitampoone, vältige pikaajalist pidevat kasutamist ja laske patsiendil sobival ajal suud loputada.

4. Hooldus pärast kasutamist

⚠ HOIATUS

- Kui orgaanilised lahustid vms kleepuvad pulbrikarbi korgile, võib see puruneda.
- Pulbrikarbi kate halveneb aja jooksul ultraviolettkiirte ja muude keskkonnategurite mõjul ning seetõttu peetakse seda tarbeesemeks. Vahetage pulbrikarbi katet iga 6 kuu tagant.
- Puhastage alati põhjalikult pulbrikarp, pulbrikarbi kate ning pulbrikarbi niit ja kork. Tehke seda kord nädalas ja kontrollige pulbrikarbi katet ja korki pragude ja kriimustuste suhtes.
- Kui avastate praod, asendage pulbrikarbi kate või kork koheselt. Kui sellist karpi kasutatakse sellisel kujul, võib pulbrikarbi kate puruneda ja selle killud võivad vigastusi tekitada.
- Prophy-Mate neo ummistumise vältimiseks pange kogu instrument kord nädalas ultrahelivanni. (Vt „5-1 Ultraheliga puhastamine“.)

⚠ ETTEVAATUST


- Rikke korral võtke parandamiseks ühendust edasimüüjaga.
- Pärast kasutamist puhastage alati põhjalikult seest ja väljast ning veenduge, et kõik pulbrijäägid oleks eemaldatud ja instrument oleks hoiustamiseks täiesti kuiv.
- Ärge kunagi seadet Prophy-Mate neo määrige. (Siiski määrige O-rõngaid kaasasoleva turbiiniõliga (vt 4-4 Määrimine.))

MÄRKUS

FLASH pearl on vees peaaegu lahustumatu. FLASH pearli kasutamisel on voolikute ummistuse vältimiseks vaja imivoolikuid, süljeimurit ja separaatorit regulaarselt puhastada ja hooldada.


4-1 Pulbri äraviskamine

1) Avage pulbrikarbi kate ja eemaldage ülejäänud puhastuspulber. (Joonis 5)

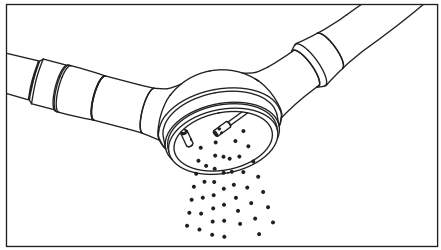

Joonis 5


2) Käivitage tühikäigul ainult õhuga, et vesi ja pulber otsikust välja lasta (joonis 6).

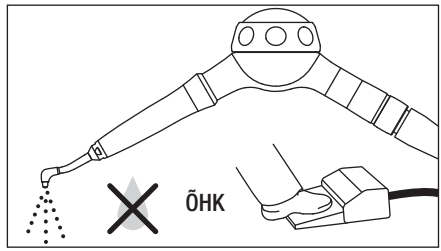

Joonis 6

3) Puhuge pulbrikarpi jäänud pulber õhuga maha. (Joonis 7)


4) Sülje ja muu füüsilise saaste eemaldamiseks pühkige otsikut ja käsiinstrumenti alkoholiga küllastunud pehme lapiga.

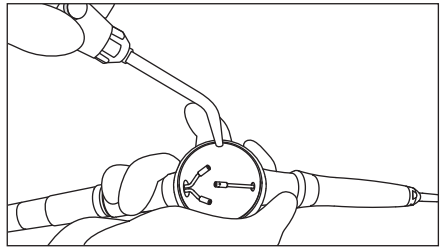


Joonis 7

4-2 Pulbri eemaldamine pulbrikarbist, käsiinstrumendist ja otsikust

1) Eemaldage pulbrikarp vooliku küljest.
2) Tõmmake käsiinstrumendi vabastuskrae tagasi ja eemaldage käsiinstrument
3) Eemaldage otsik otsikuvõtme abil (joonis 8)
4) Paigaldage kaasasolev puhuri otsik haakeseadise külge ja kinnitage see käsiinstrumendi külge. Torude puhastamiseks töötage tühikäigul ilma veeta kauem kui 5 sekundit. (Joonis 9)

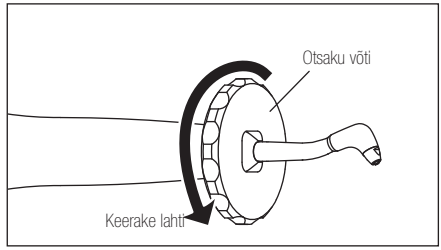

Joonis 8

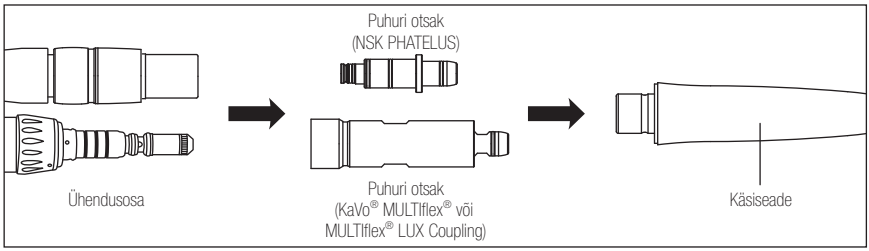


✻ Saadaval on ka teiste kaubamärkidega ühendusosade puhuri otsakud.

Joonis 9

Kasutage puhuri otsikut samal viisil, et puhastada Prophy-Mate neo otsiku torusid. Puhuge otsiku kaugeimast otsast.

⚠ ETTEVAATUST


Tühikäigul töötades hoidke komponente korralikult kinni.

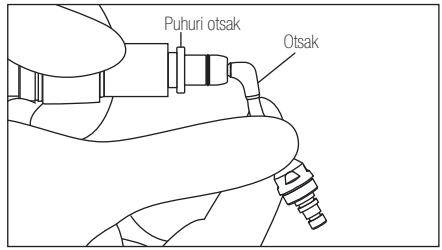

Joonis 10


4-3 Puhastamine ja pesemine

1) Puhastage hoolikalt käsiinstrumendi liiteosa ja pulbrikarbi O-rõngaosa sisemust lisatud puhastusharjaga. (Joonis 11)

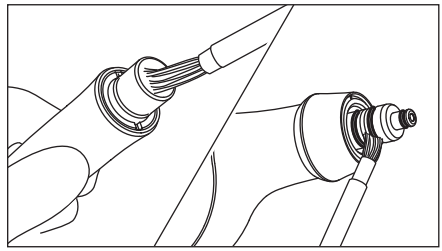


Joonis 11

Kui O-rõnga osa külge kleepub pulber, eemaldage O-rõngad ja puhastage hoolikalt O-rõngaid ja sooni. (Joonis 12)

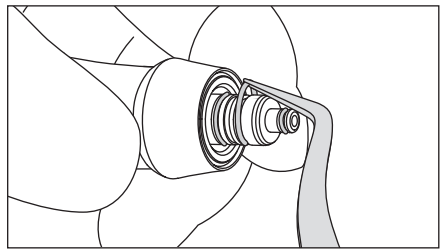

Joonis 12


2) Eemaldage kummist tihend ja võtke lahti pulbrikarbi kork. (Joonis 13)

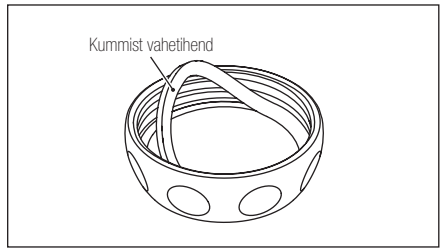

Joonis 13

3) Peske jooksva vee all pulbrikarbi/pulbrikorgi siseküljele kleepunud puhastuspulber ära. (Joonis 14)

4) Kuivatage ja pange kokku pulbrikarbi kate, kummitihend ja kaanehoidik.

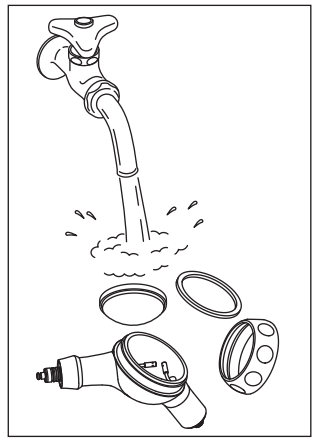

Joonis 14


⚠ ETTEVAATUST

Kui puhastuspulber jääb pulbrikarpi, siis pulber paakub ja see võib põhjustada ummistust.

4-4 Määrimine

1) Kuivatage pulbrikarbi O-rõnga osa, kandke tilk kaasas olevat turbiiniõli ja hõõruge see sõrmega sisse. (Joonis 15)

2) Steriliseerige autoklaavis.

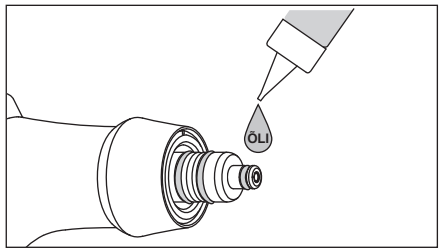

Joonis 15

⚠ ETTEVAATUST

Kui O-rõngaste määrimist eiratakse, võib puudrikarbi ja käsiinstrumendi ühenduskoht kahjustuda. Pulbrikott ja käsiinstrument ei pruugi enam vabalt pöörata ja liigend võib lekkida.

5. Puhastamine ja steriliseerimine



Termodesinfitseerimisseadmes saab pesta ainult Prophy-Mate neo käepideme osa. Ärge peske termodesinfitseerimisseadmes pulbrikarpi ega pulbrikorki.

5-1 Ultraheliga puhastamine

⚠ ETTEVAATUST

Instrumendi ummistumise vältimiseks puhastage Prophy-Mate neot ultrahelivannis, kui see on nõrk.

1) Võtke lahti ja puhastage. (Vt 4-1 Pulbri äraviskamine kuni 4-3 Puhastamine ja pesemine.)
2) Tõmmake kinnitatud düüsi mutrivõti otsiku otsast välja, vabastage otsik ja eemaldage otsik käsiinstrumendi küljest.
3) Puhastage kuuma veega käsiinstrument, pulbrikarp ja otsik aga ultraheliga.
4) Pärast puhastamist puhuge veepiisad kõikidelt osadelt kuiva õhuga maha.
5) Pange uuesti kokku lahtivõtmisele vastupidises järjekorras.
6) Ühendage pulbrikarp ilma pulbrikorgita voolikuga ja töötage tühikäigul, et puhastada sisemised torud veest.

⚠ ETTEVAATUST

- Otsiku paigaldamisel keerake otsik esmalt käsitsi sisse, kuni see on kergelt pingutatud, ja seejärel pingutage otsiku mutrivõtmega.
- Eelkõige kuivatage põhjalikult pulbrikarbi sisemus.

5-2 Steriliseerimine

- Soovitatav on steriliseerimine autoklaavis. Steriliseerimine on vajalik esmakordsel kasutamisel ja pärast iga patsienti.
- Kõik osad on autoklaavitavad.

■ Autoklaavimise protseduur


1) Võtke lahti ja puhastage. (Vt 4-1 Pulbri äraviskamine kuni 4-4 Määrimine.)
2) Sisestage autoklaavikotti. Sulgege kott.
3) Autoklaavitav kuni max 135 °C.
   nt) Autoklaavige 20 min temperatuuril 121 °C või 15 min. temperatuuril 132 °C.
4) Hoidke käsiinstrumenti autoklaavikotis, et hoida seda puhtana kuni kasutamiseni. Kasutamiseks pange uuesti kokku lahtivõtmisele vastupidises järjekorras.


* EN13060 või EN ISO17665-1 soovitab steriliseerida temperatuuril 121°C kauem kui 15 minutit.



⚠ ETTEVAATUST

- Enne kasutamist kuivatage kõiki osi põhjalikult.
- Eemaldage pulbrikarbilt kork ja steriliseerige autoklaavis. Pulbrikarbi steriliseerimine koos pealoleva korgiga võib lõppeda kaane purunemisega.
- Autoklaavis steriliseerimine koos keemiliselt kleepuvate instrumentidega põhjustab plaadi koorumise või mõjutab sisemisi osi. Olge ettevaatlik, et mitte lubada kemikaalide sattumist autoklaavi sterilisaatorisse.
- Kuna on juhtumeid, kus seadistatud temperatuur võib lokaalselt autoklaavis asuva küttekeha läheduses ületada, ärge kunagi asetage toodet küttekeha lähedusse.
- Ärge pühkige kõrge happesusega veega ega steriliseerivate lahustega, ärge puhastage ega kastke nendesse.

6. Tõrkeotsing

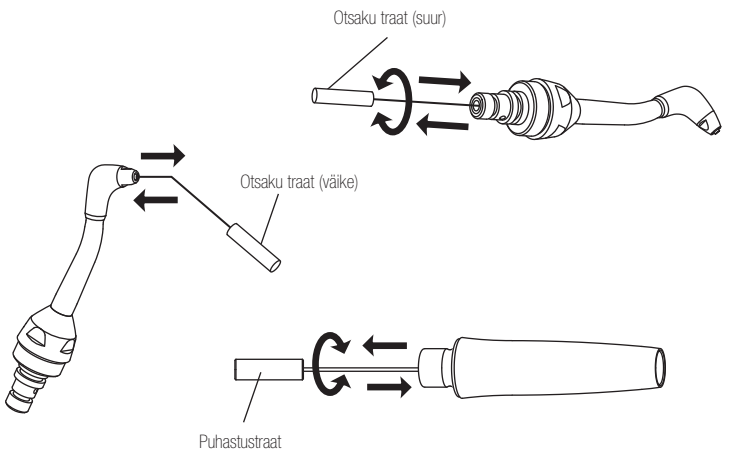Sümptom	Kontrollitav üks	Tõenäoline põhjus	Lahendus
Õhk ja pulber ei tule välja.	Käsiseadme eemaldamisel ja õhu väljutamisel väljuvad käsiseadme liitekohast õhk ja pulber.	Pulber on käsiseadme ummistanud.	Vabastage otsak kaasasoleva otsaku võtmega ja eemaldage otsak käsiseadme küljest. Puhastage otsaku tippu kaasasoleva otsaku traadiga (väike) ja selle allosa otsaku traadiga (suur). Puhastage puhastustraadiga ka käsiseadme sisemust. Kui ülalmainitud puhastamisest hoolimata see ei välju, tehke kuuma veega ultrahelipuhastamine. (Vt „5-1 Ultraheliga puhastamine“.) 

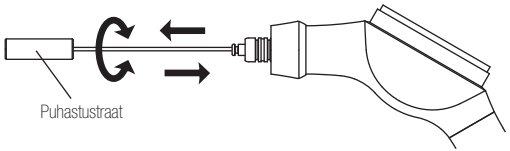	Õhk ja pulber ei välju pulbri ümbrisest, isegi kui käsiseade on eemaldatud ja õhku väljutatakse.	Pulber on pulbri ümbrise ummistanud.	Suunake puhastustraat läbi pulbri ümbrise käsiseadme ühenduskoha otsaku keskosas oleva ava, pöörates seda samal ajal, ja puhastage otsaku traadiga (suur) ka sisemiste otsakute sisselaskeavad. Kui ülalmainitud puhastamisest hoolimata pulber ja õhk ei välju, tehke kuuma veega ultrahelipuhastamine. (Vt „5-1 Ultraheliga puhastamine“.) 
Käsiseadme ja pulbri ümbrise vahelt lekib vett.	Kontrollige pulbri ümbrise käsiseadme liitekoha rõngastihendeid.	Rõngastihend on kahjustatud.	Asendage pulbri ümbrise käsiseadme ühenduskoha rõngastihend(id), kandke sellele kaasasolevat turbiiniõli ning hõõruge seda sõrmede ja teiste materjalidega. (Vt jaotisi „4-3 Puhastamine ja pesemine“ kuni „4-4 Määrimine“.)
Pulbri ümbrise ja käsiseadme vahelist ühendust on raske pöörata.	Kontrollige pulbri ümbrise käsiseadme liitekoha rõngastihendeid.	Puhastuspulber on sisenenud rõngastihendi soontesse, muutes liitekoha ühendamise keeruliseks.	Eemaldage rõngastihendid pulbri ümbrise käsiseadme ühendukohast ning puhastage ettevaatlikult kaasasolevat puhastusharja kasutades soontesse ja rõngastihenditele kleepunud puhastuspulber. Seejärel pühkige käsiseadme ühenduskohta ettevaatlikult alkoholiga niisutatud riidega, kandke sellele kaasasolevat turbiiniõli ning hõõruge seda sõrmi või teisi materjale kasutades. (Vt jaotisi „4-3 Puhastamine ja pesemine“ kuni „4-4 Määrimine“.)

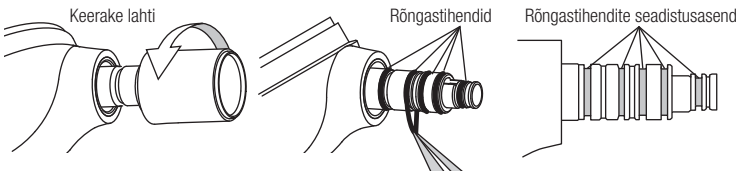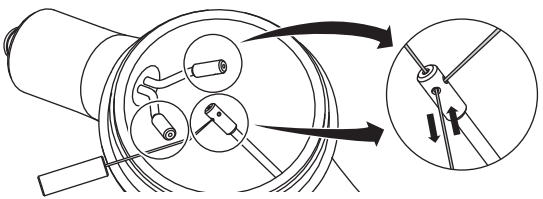Õhk ja pulber väljuvad nõrgalt ja puhastusjõud on samuti nõrk.	Puhastuspulber on mahutis osaliselt tahkunud.	Kasutati puhastuspulbrit, mis oli jäetud pikaks ajaks seisma.	Asendage puhastuspulber uuega.
		Sisestusõhk oli segatud veega.	PHATELUS-liitmikuga mudeli kasutamisel kontrollige liitmiku ühenduskoha rõngastihendit purunemise suhtes. Kui rõngastihend on katki, asendage see. Muu mudeli kasutamisel peale PHATELUS-liitmiku kontrollige, millist liitmikku te kasutate. 
			Avage õhu toiteahela filtri ja kompressori väljalaskeavad ja kontrollige vee kogunemise suhtes.
	Puhastuspulber on käsiseadmes või pulbri ümbrises osaliselt tahkestunud, muutes läbipääsutee kitsamaks.	Niiskuse jne tõttu puhastuspulber osaliselt tahkestus õhutorus.	Puhastage, sisestades kinnitatud otsaku traadi (väike) ja samal ajal seda pöörates, ning puhuge kogu sisse jäänud pulber õhuga välja. Kui see probleemi ikka veel ei lahenda, puhastage kuumas vees ultraheliga. Pärast seda kuivatage enne kasutamist põhjalikult. (Vt „5-1 Ultraheliga puhastamine“.) 

* Kui ülaltoodud välistunnustel põhinevat paranemist ei toimu, võtke ühendust edasimüüjaga.

CE 0197 Selle meditsiiniseadme konstrueerimisel ja tootmisel kohaldati ELi direktiivi 93/42/EMÜ.

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH EC REP
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

Külastage meie veebisaiti

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

2023-01-05