

NSK GUIDA RAPIDA ALL'USO Varios Combi Pro2

Pannello di controllo

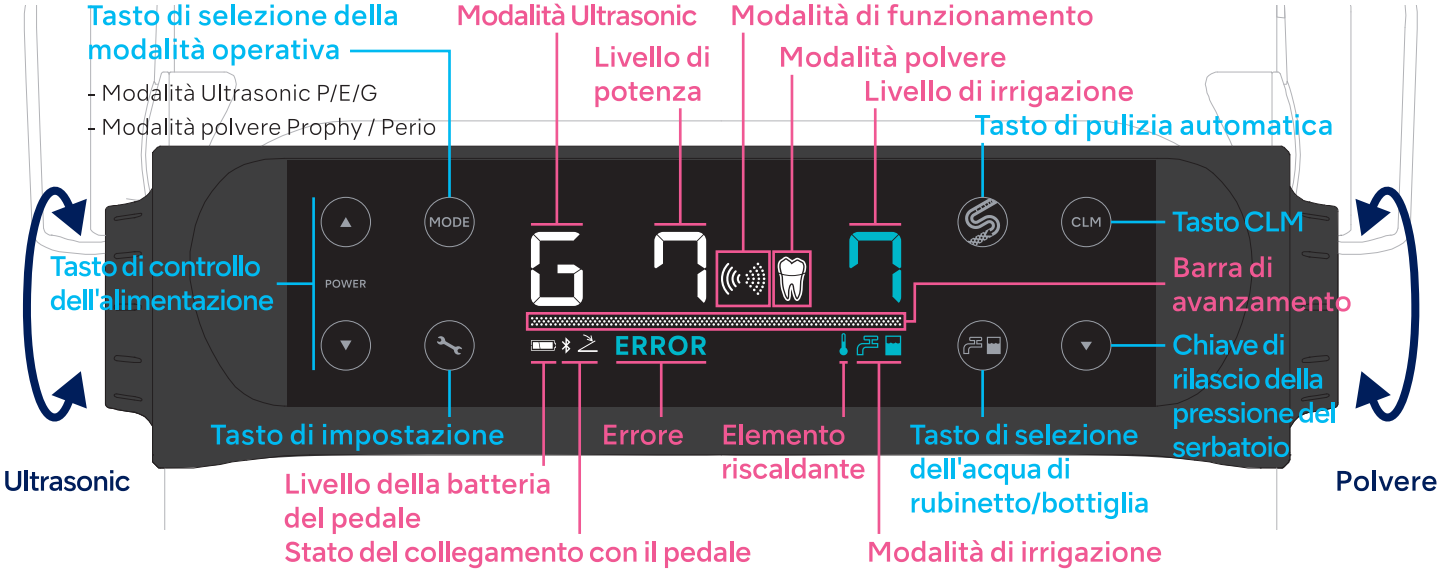


Impostazione dell'irrigazione

Pedale

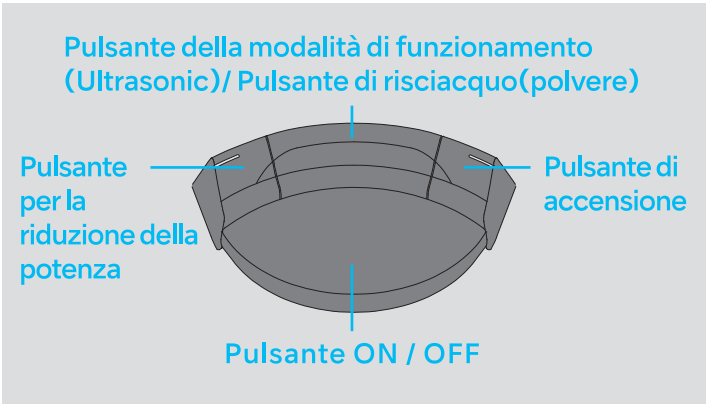

Utilizzo della modalità Ultrasonic


① Impugnare il manipolo Ultrasonic. ②Selezionare la modalità Ultrasonic (P/E/G). ③Impostare il livello di potenza. ④Selezionare il metodo di irrigazione. ⑤Regolare il livello di irrigazione. ⑥Premere il pulsante ON / OFF

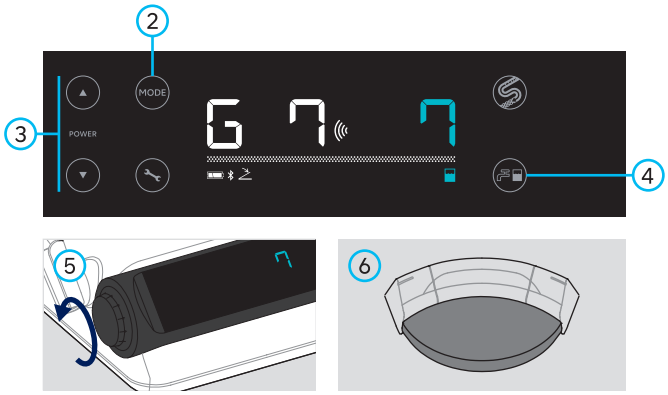



Utilizzo della modalità polvere

Modalità	Serbatoio	Manipolo	Puntale	Utilizzo	Polvere
				3 - 5 mm 10 - 60°	
				3 - 10 mm 30 - 90°	
				3 - 10 mm 30 - 90°	
				30 - 90° 3 - 10 mm	

① Impugnare il manipolo polvere. ②Selezionare la modalità polvere (Prophy / Perio). ③Impostare il livello di potenza. ④Regolare il livello di irrigazione. ⑤Premere il pulsante ON / OFF.

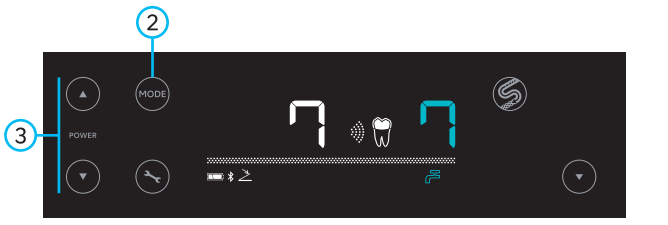

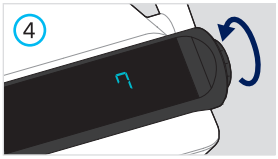

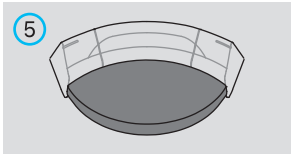


NAKANISHI INC. 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

CE 0197


Pulizia automatica

	Frequenza di esecuzione delle modalità di pulizia automatica	Utilizzo effettivo di Varios Combi Pro2		
		Ultrasonic e **Powder**	**Polvere** Solo	**Ultrasonic** Solo
Modalità di pulizia automatica da attivare	Dopo ogni trattamento	W(Powder)	W(Powder)	—
	Una volta al giorno (dopo il trattamento finale)	D	P	W (Ultrasonic)

W (Ultrasonic) : Rimozione dell'acqua
W (Polvere) : Rimozione dell'acqua e della polvere di spurgo
P : Rimozione dell'acqua dal tubo del manipolo
Rimozione della polvere dal circuito della polvere
Rilascio della pressione del serbatoio
D : Rimozione dell'acqua dal cordone/tubo del manipolo
Rimozione della polvere dal circuito della polvere
Rilascio della pressione del serbatoio

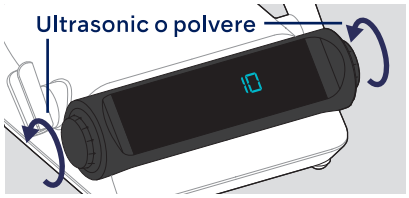


Impostare il livello di irrigazione su 10.

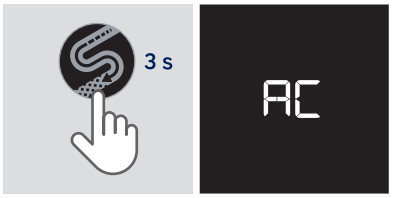


Toccare per 3 secondi, finché non viene visualizzato "AC".


W

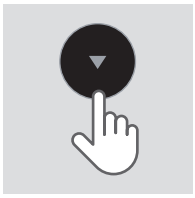

Selezionare "W".

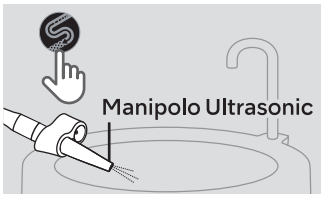

o

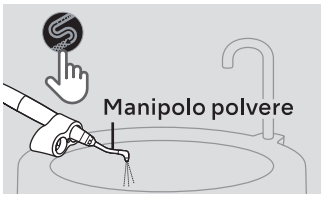


Inserire il manipolo con il cordone o il tubo nel supporto CLM. Toccare .




Quando appare "Fin", toccare .


P
D

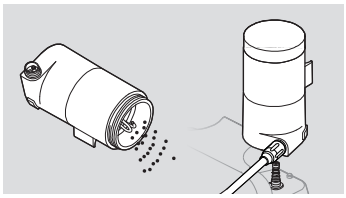

Smaltire la polvere e collegare il serbatoio.

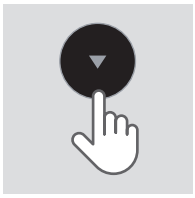

Selezionare "D" o "P".

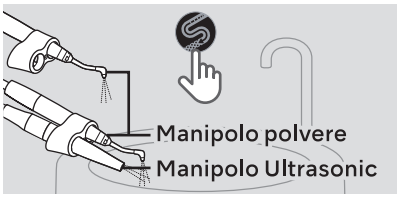

Inserire i manipoli con cordone / tubo nel supporto CLM. Toccare .




Quando appare "Fin", toccare .


Decontaminazione / prevenzione della formazione di biofilm(Modalità CLM)



Riempire la bottiglia CLM con b.clean (non diluito).

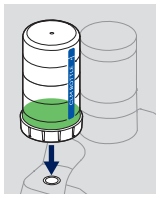


Inserire la bottiglia CLM.

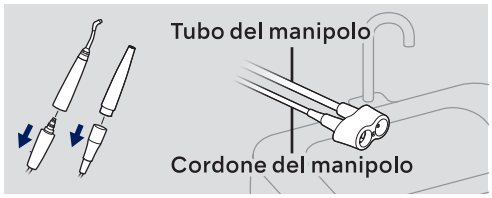


Rimuovere il cordone / tubo del manipolo da ciascun manipolo e inserirlo nel supporto CLM.




Toccare per 3 secondi, finché non appare la visualizzazione qui sopra.

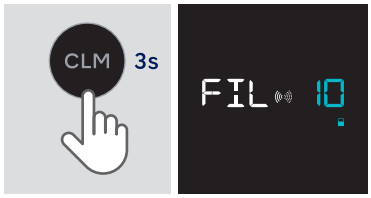


Toccare per 3 secondi, finché non si avvia la modalità CLM.

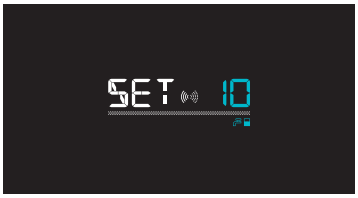


Quando appare la visualizzazione qui sopra, spegnere l'alimentazione e attendere almeno 12 ore.

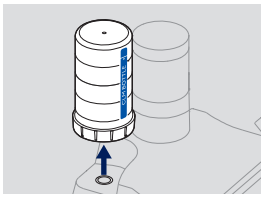

Accendere l'alimentazione. Rimuovere la bottiglia CLM.

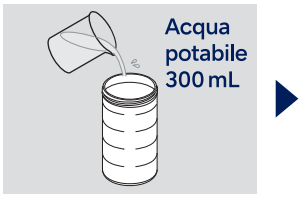

Riempire la bottiglia di irrigazione disinfettata con acqua potabile.

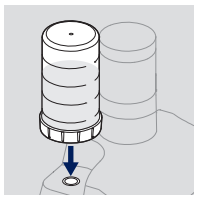

Inserire la bottiglia di irrigazione.



Toccare per 3 secondi, fino all'inizio dello scarico.



La modalità CLM è completa quando appare la visualizzazione sopra riportata. Toccare per passare alla visualizzazione normale.

Per i dettagli, consultare il manuale d'uso di OM-DE1313MA Varios Combi Pro2.

2025-03-20