
GUIA DE FUNCIONAMENTO RÁPIDO do Varios Combi Pro2


OM-DE1275PT 000

Painel de controlo

Definição da irrigação

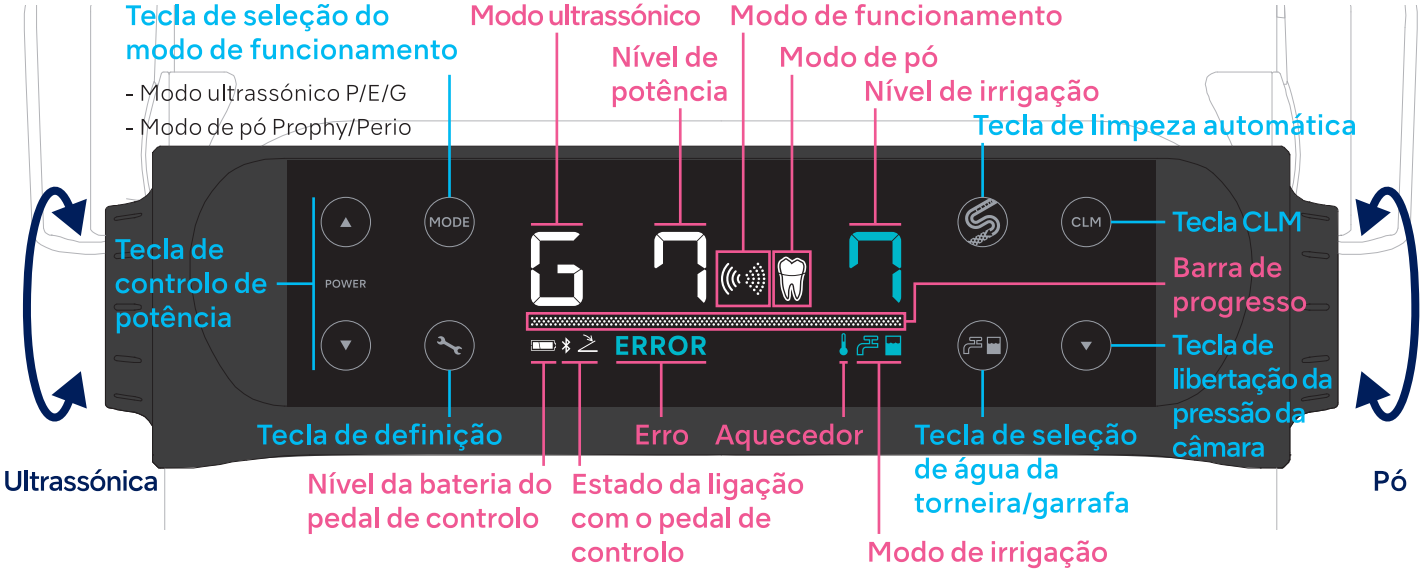


Pedal de controlo

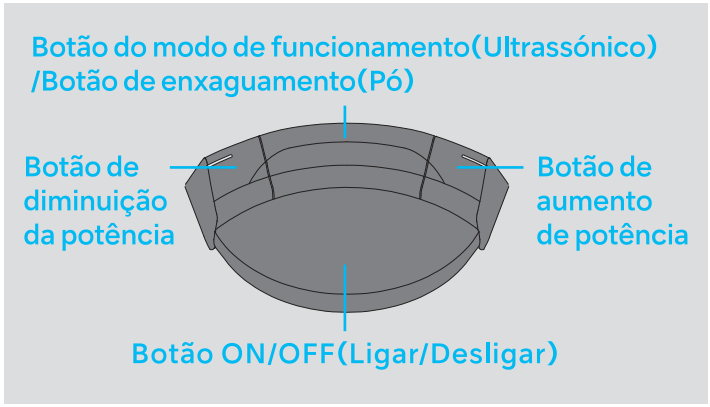

Utilizar o modo ultrassónico


① Segure a peça de mão ultrassónica. ②Selecione o modo ultrassónico(P/E/G). ③ Defina o nível de potência. ④ Selecione o método de irrigação. ⑤Ajuste o nível de irrigação. ⑥Prima o botão ON/OFF(Ligar/Desligar)

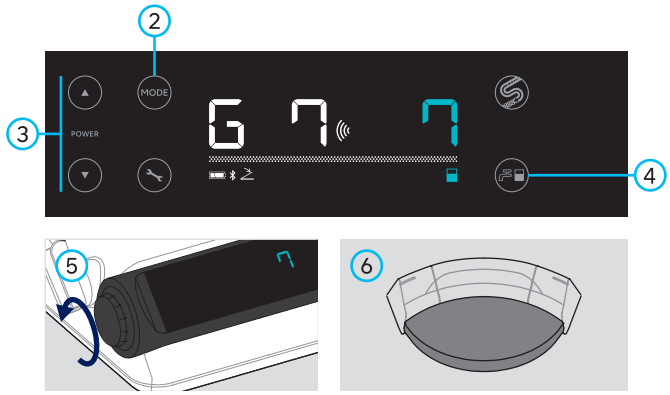

Utilizar o modo de pó

Modo	Câmara	Peça de mão	Bocal	Utilização	Pó
				3 - 5 mm, 10 - 60°	
				3 - 10 mm, 30 - 90°	
				3 - 10 mm, 30 - 90°	
				30 - 90°, 3 - 10 mm	

① Segure a peça de mão de pó. ②Selecione o modo de pó (Prophy /Perio). ③Defina o nível de potência. ④Ajuste o nível de irrigação. ⑤Prima o botão ON/OFF (Ligar/Desligar).

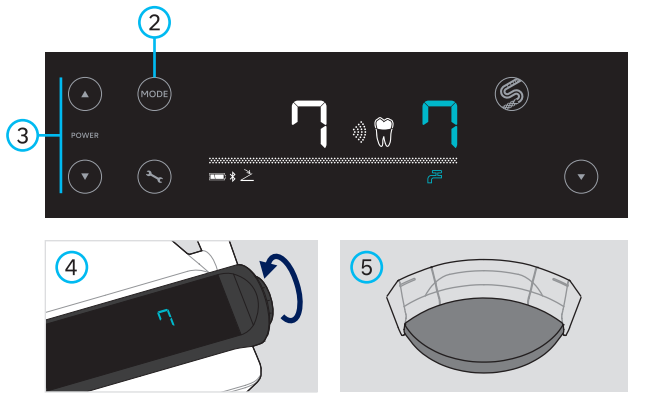

NAKANISHI INC. 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

CE 0197


Limpeza automática

	Frequência de execução dos modos de limpeza automática	Utilização efetiva do Varios Combi Pro2		
		Ultrassónica e **Pó**	**Pó** apenas	**Ultrassónica** apenas
Modo de limpeza automática a ativar	Após cada tratamento	W(pó)	W(pó)	—
	Uma vez por dia (após o tratamento final)	**D**	**P**	**W** (ultrassónico)


W (Ultrassónica) : Remoção de água
W (Pó) : Remoção da água e do pó de purga
P : Remoção da água da mangueira da peça de mão
Remoção de pó do circuito de pó
Libertação da pressão da câmara
D : Remoção da água do cabo/mangueira da peça de mão
Remoção de pó do circuito de pó
Libertação da pressão da câmara



Defina o nível de irrigação para 10.

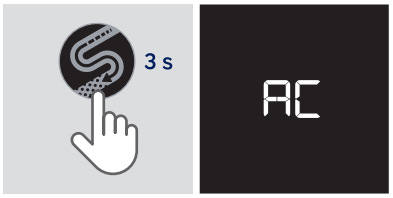


Toque em durante 3 segundos, até "AC" ser apresentado.

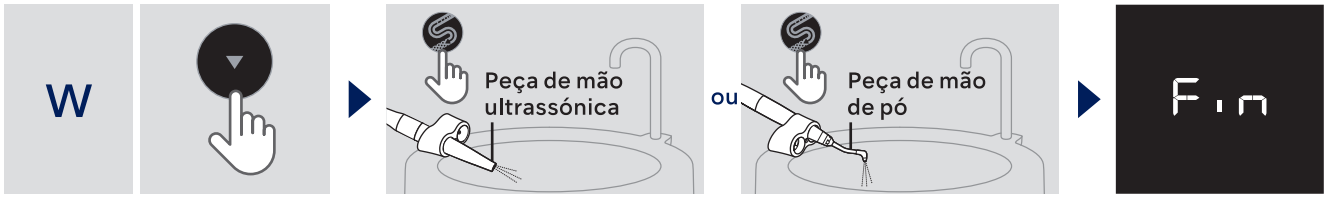

Selecione "W".

Insira a peça de mão com o cabo ou a mangueira no suporte CLM. Toque em .

Depois de "Fin" ser apresentado, toque em .

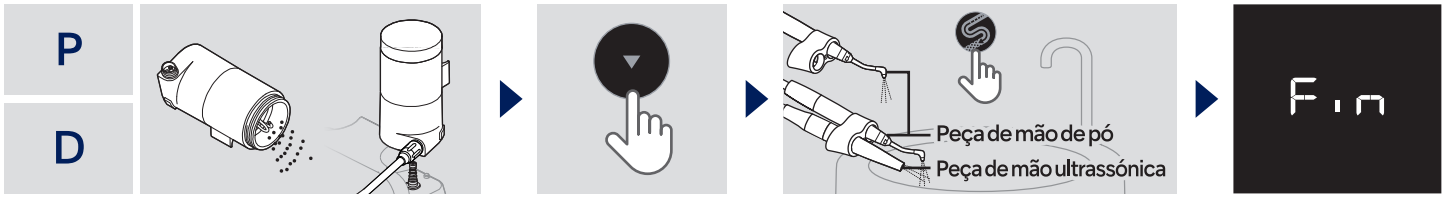


Elimine o pó e instale a câmara.

Selecione "D" ou "P".

Insira as peças de mão com o cabo /mangueira no suporte CLM. Toque em .

Depois de "Fin" ser apresentado, toque em .

Descontaminação/prevenção da formação de biofilme (Modo CLM)

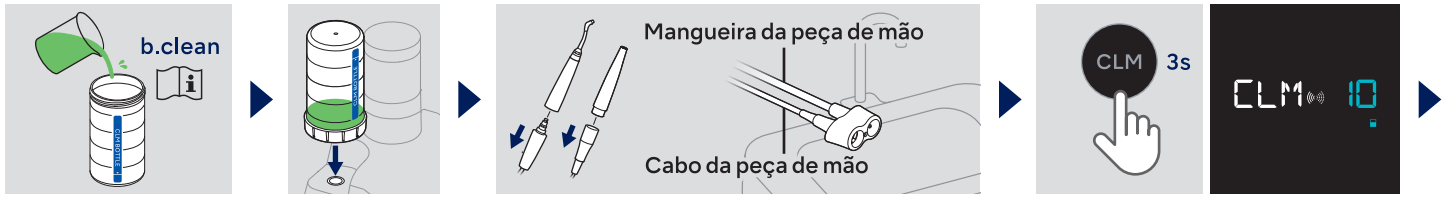


Encha a garrafa CLM com b.clean (não diluído).

Insira a garrafa CLM.

Retire o cabo/mangueira de cada peça de mão e insira-os no suporte CLM.

Toque em durante 3 segundos, até o ecrã acima ser apresentado.

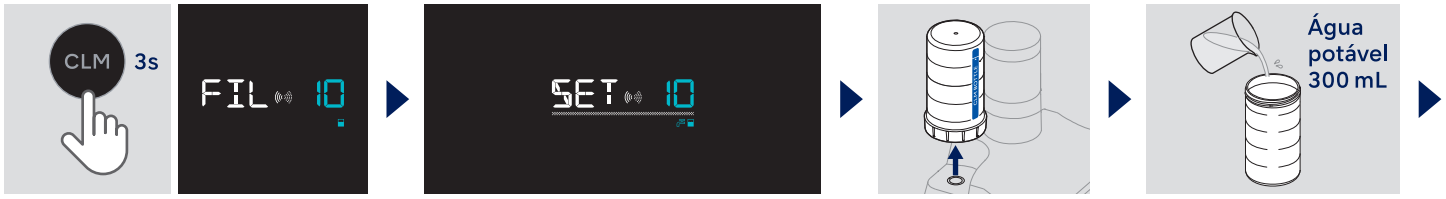


Toque em durante 3 segundos, até o modo CLM iniciar.

Após a apresentação do ecrã acima, desligue a alimentação e aguarde 12 horas ou mais.

Ligue a alimentação. Retire a garrafa CLM.

Encha a garrafa de irrigação desinfetada com água potável.

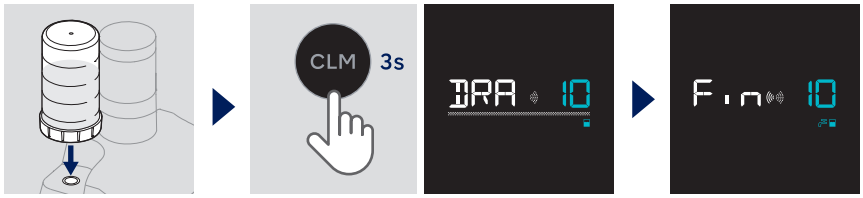

Insira a garrafa de irrigação.

Toque em durante 3 segundos, até a drenagem começar.

O modo CLM está concluído quando o ecrã acima é apresentado. Toque em para voltar ao ecrã normal.

Para mais informações, consulte o manual de funcionamento do OM-DE1313MA Varios Combi Pro2.

2025-03-20