DRIFTSHÅNDBOK

Adaptere for DAC Universal

NSK

CE

MADE IN JAPAN

1 Forord

Norsk

1–1 Tilsiktet bruk

Denne adapteren er et tilbehør utviklet for å koble det angitte håndstykket til Dentsply Sironas DAC Universal D / DAC Universal S (med grønt / hvitt lokk) for automatisk rengjøring.

1–2 Forholdsregler ved håndtering og bruk

- Les disse sikkerhetsadvarslene nøye før bruk, og bruk produktet riktig.
- Disse indikatorene er ment å hjelpe deg med å bruke produktet på en trygg måte og forhindre fare og skade for deg og andre. De er klassifisert etter graden av fare, skade og alvorlighet. Alle indikatorene gjelder sikkerhet – følg dem nøye.

Klasse	Risikograd
⚠ FORSIKTIG	Fare som kan føre til mindre personskade eller materielle skader dersom sikkerhetsinstruksjonene ikke følges korrekt.

⚠ FORSIKTIG

- Les denne bruksanvisningen før bruk for å få full forståelse av produktets funksjoner, og oppbevar den for fremtidig referanse.
- Ikke bruk dette produktet til andre formål enn det som er angitt. Bruk produktet i henhold til dets tilsiktede bruk og bruksanvisningen.
- Bruk, vedlikehold og løpende inspeksjon av adapteren er brukerens ansvar.
- Skruer for å feste lokket og adapteren er ikke inkludert. Bruk originale skruer til DAC Universal D / DAC Universal S.
- Dette produktet er ikke en originaldel av DAC Universal D / DAC Universal S. Vær oppmerksom på at bruk av dette produktet kan ugyldiggjøre garantien eller serviceberettigelsen for DAC Universal D / DAC Universal S ved feil eller skade.
- Ikke kjør gjenbehandlingssyklusen med håndstykket tilkoblet når kammeret er fylt med rengjøringsmiddel. Dette kan skade håndstykket.
- Utfør gjenbehandlingsprosedyren i henhold til bruksanvisningen for hvert enkelt håndstykke.
- Vær forsiktig så du ikke berører produktet etter gjenbehandling – det kan være varmt.
- Fjern produktet innen én time etter gjenbehandling for å forhindre korrosjon.
- Hvis O-ringen på adapteren mangler, kan håndstykket bli utilstrekkelig rengjort.
- Ikke utsett adapteren for støt. Ikke mist produktet. Deformasjon kan føre til funksjonsfeil under bruk.
- Forsikre deg om at adapteren er ren og ubeskadiget før bruk.
- Ikke demonter eller modifiser adapteren.
- Ikke koble til andre håndstykker enn de som er spesifisert i avsnitt "3–2 Tilkobling / frakobling av håndstykke".
- Hvis det oppdages avvik, stopp bruken umiddelbart og kontakt en autorisert NSK-forhandler.

1–3 Symbolforklaring

	Se bruksanvisningen	LOT	Partikode
	Forsiktig		Produksjonsdato
CE	CE-merkingen bekrefter at dette produktet oppfyller gjeldende lovkrav i Den europeiske union (EU).	UDI	Unik produktidentifikator (UDI – Unique Device Identifier)
	Produsent		GS1 DataMatrix for unik produktidentifikator
	Importør		Transport- og lagringsmiljø
EU REP	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap		Temperaturbegrensning
REF	Katalognummer (bestillingskode)		Fuktighetsbegrensning
MODEL:	Modell		Begrensning for atmosfærisk trykk

1–4 Avhending av produkter

Når din medisinske enhet (adapter) har nådd slutten av sin levetid, skal den kasseres gjennom en spesialisert kanal for innsamling, fjerning, gjenvinning eller destruksjon. Før dette gjøres, og for å unngå helserisiko for personell som håndterer medisinsk avfall, samt risiko for miljøforurensning, må det bekreftes at utstyret er dekontaminert. Kontakt derfor din nærmeste NSK-forhandler eller en av NSK-filialene for å få informasjon om hvordan du skal gå frem. Se lenken nedenfor:




1–5 Garanti

NSK-produkter er dekket av garanti mot produksjonsfeil og materialfeil. NSK forbeholder seg retten til å analysere og fastslå årsaken til eventuelle problemer. Garantien bortfaller dersom produktet ikke brukes riktig eller til tiltenkt formål, eller hvis det har blitt manipulert av ukvalifisert personell eller det er montert deler som ikke er fra NSK. Reservedeler er tilgjengelige i syv år etter at modellen er tatt ut av produksjon. Kontakt en autorisert NSK-forhandler dersom reparasjon er nødvendig.

2 Produktbeskrivelse

2–1 Pakkens innhold

Følgende deler er inkludert med hver DACA-10/20/30:

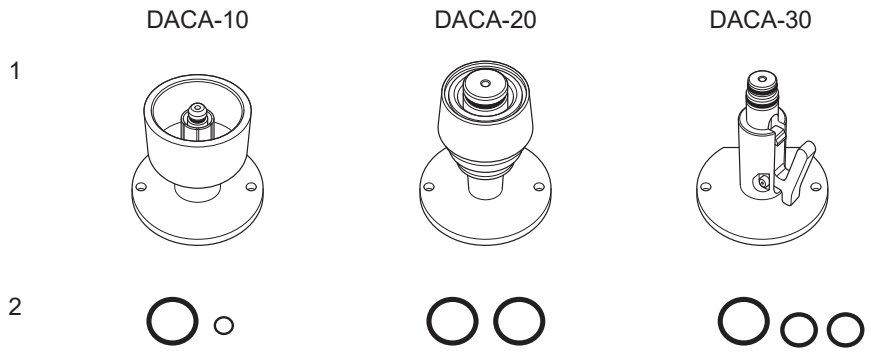


Nr.	Delenavn	Antall
1	Adapter	1
2	O-ring-sett	1

3 Bruksanvisning

3–1 Tilkobling / frakobling av adapter

Dette avsnittet forklarer prosedyren med DACA-10 som eksempel. Andre adaptere kobles til på samme måte.

❶ Sett inn O-ringen i O-ring-sporet på undersiden av adapteren.

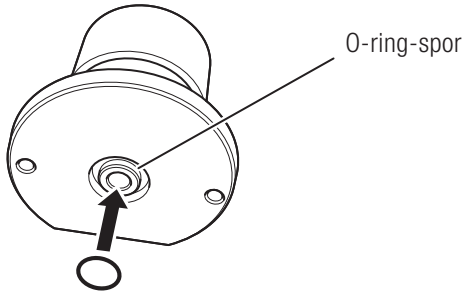


⚠ FORSIKTIG

- O-ringen er ikke montert på undersiden av adapteren ved levering. Sørg for å montere den medfølgende O-ringen på undersiden før bruk.
- Sørg for at O-ringen ikke er vridd.

❷ Plasser adapteren slik at den rette delen på undersiden vender innover, og juster skruehullene med hullene i det grønne / hvite lokket på DAC Universal D / DAC Universal S.

❸ Bruk en 1,5 mm unbrakonøkkel for å stramme skruene og feste adapteren til lokket.

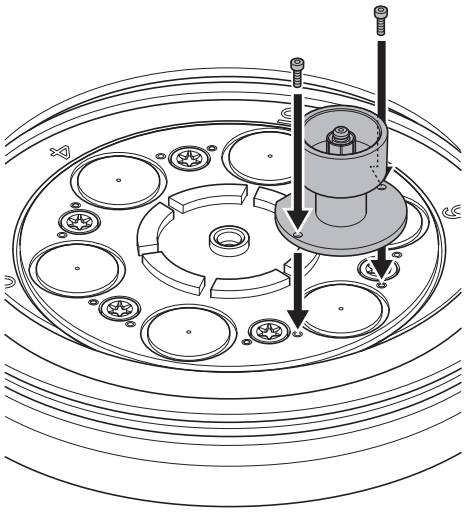

⚠ FORSIKTIG

- Bruk kun originale skruer og en 1,5 mm unbrakonøkkel til DAC Universal D / DAC Universal S.

For å frakoble adapteren, følg prosedyren i omvendt rekkefølge.

3–2 Tilkobling / frakobling av håndstykke

Følgende håndstykker kan kobles til adapteren:

Modell	Håndstykke
DACA-10	NSK Varios2 ultralydhåndstykke
DACA-20	NSK Prophy-Mate neo håndstykke / Perio-Mate håndstykke
DACA-30	NSK Prophy HP / Perio HP – Varios Combi Pro-serien


⚠ FORSIKTIG

- Ikke koble til andre håndstykker enn de som er spesifisert for bruk med adapteren. Dette kan føre til funksjonsfeil.

3–2–1 DACA-10


Tilkobling

1. Sett inn håndstykket helt til det klikker på plass.
2. Trekk forsiktig i håndstykket for å forsikre deg om at det er sikkert låst.

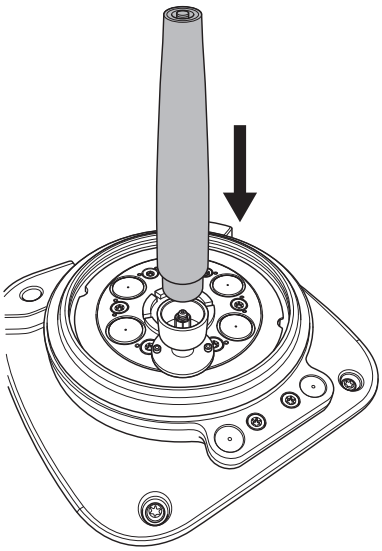

Frakobling


1. Hold lokket fast og trekk ut håndstykket.

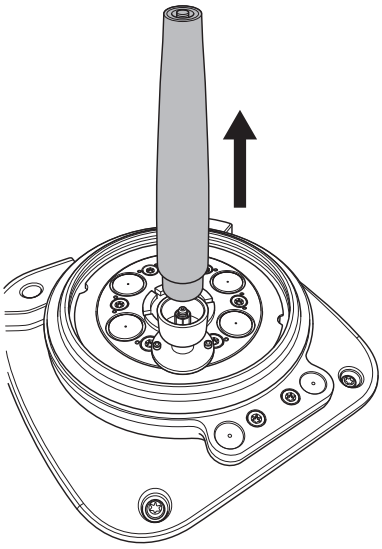

3–2–2 DACA-20


Tilkobling

1. Hold adapterringen nede og sett inn håndstykket helt.
2. Slipp ringen, og trekk deretter forsiktig i håndstykket for å forsikre deg om at det er sikkert låst.

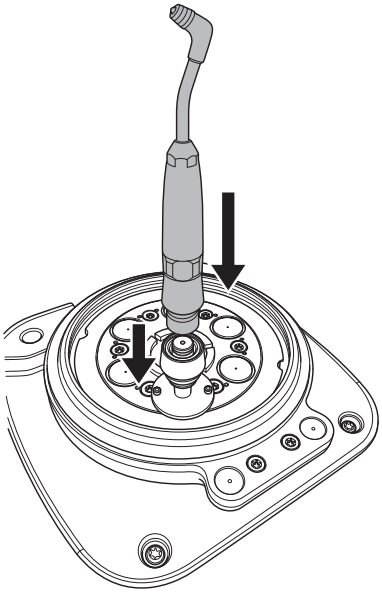

Frakobling


1. Hold adapterringen nede og trekk ut håndstykket.

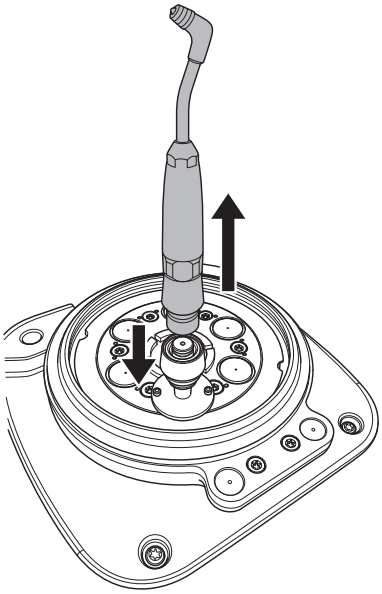

3–2–3 DACA-30


Tilkobling

1. Sett inn håndstykket helt til det klikker på plass.
2. Trekk forsiktig i håndstykket for å forsikre deg om at det er sikkert låst.

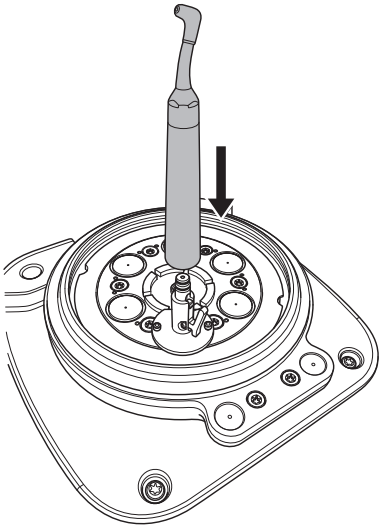

Frakobling

1. Trykk inn adapterens spak og trekk ut håndstykket.

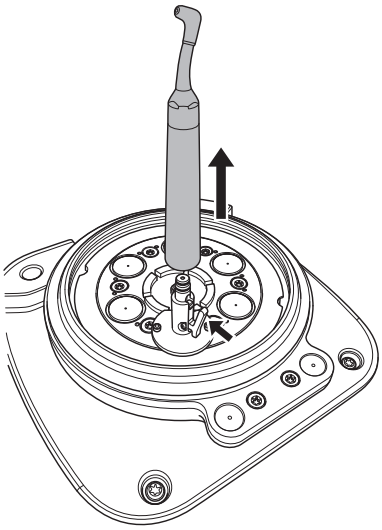

4 Vedlikehold

4–1 Rengjøring

Koble fra produktet og tørk overflaten regelmessig med en myk, lofri klut fuktet med desinfeksjonssprit.

4–2 Periodiske vedlikeholdskontroller


Utfør regelmessig inspeksjon av dette produktet hver tredje måned i henhold til sjekklisten nedenfor. Dersom det oppdages uregelmessigheter i noen av punktene, kontakt en autorisert NSK-forhandler og bytt ut produktet med et nytt.


Kontrollpunkter	Detaljer
Adapterhus	Sjekk for deformasjon, skader, misfarging eller andre avvik.

4–3 Utskifting av O-ring

O-ringen er en slitedel. Bytt den hver tredje måned eller etter 250 sykluser – avhengig av hva som kommer først.
Denne delen forklarer prosedyren med DACA-10 som eksempel. Andre adaptere tilkobles på samme måte.

❶ Fjern adapteren fra lokket, og bruk en tannsonde eller lignende verktøy for å fjerne alle O-ringer.

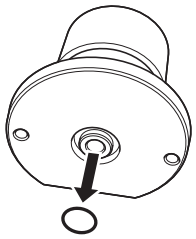

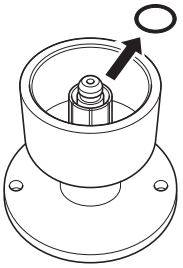


❷ Sett nye O-ringer i sporene på adapteren, og monter adapteren tilbake på lokket.

5 Reservedelsliste

Modell	REF	Merknad
O-ring-sett	Y1500923	For DACA-10
O-ring-sett	Y1500924	For DACA-20
O-ring-sett	Y1500925	For DACA-30

6 Spesifikasjoner

Transport- og lagringsbetingelser

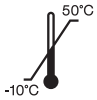	Temperatur	Luftfuktighet	Lufttrykk
			

*Ingen kondens

NAKANISHI INC.
700 Shimohinata, Kanuma
Tochigi 322-8666, Japan
nsk-dental.com

NSK Europe GmbH EU REP
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn
Germany

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

2025-08-26