NSK

Prophylaxis Powder

FLASH pearl

OPERATION MANUAL

CE 0197 The EU directive 93/42/EEC was applied in the design and production of this medical device.

OM-DZ0946MA 000

ENGLISH

Thank you for purchasing NSK's FLASH pearl air polishing powder. Make sure you read this product usermanual carefully before use, and keep it in a place where it can be referred to at any time.

INTENDED USE
This product is for use by dentists, therapists and hygienists only.

WARNING
- Do not use on the following patients.
  1. Those with respiratory diseases.
  2. Those with pathologically deep periodontal pockets (6mm or more) or mucosal lesion.
  3. Those with grave ulcers in digestive organs.
  4. Those with hepatic dysfunction.
  5. Those with lung or cardiac disturbance or ventilatory/respiratory impairment.
  6. Those with wounds, injuries or abnormality in the oral cavity.
  7. Those with hyperemia, hemorrhage, or inflammation in the oral cavity.
  8. Those who tend to develop an inflammation or sores in the oral mucous membrane.
  9. Those with allergies.
  10. Those wearing contact lenses.
  11. Depending on the patient's constitution, allergy symptoms or stomatitis may be caused in very rare cases. If such symptoms are detected, stop using the product immediately.
- Never direct the powder jet directly on to the cementum, on the roots of teeth, decalcified enamel, filling materials, margins of prosthetic appliances and filling materials, crowns, etc.


CAUTION
- In case any powder gets in the eyes wash out immediately with lots of water and consult an ophthalmologist.
- Be very careful to avoid cleaning powder entering anybody's mucosal areas (eyes, nose etc) other than the oral cavity. Also, protect the face with a towel, etc., or protective glasses, etc., to prevent entry of cleaning powder into eyes.
- During use, both the operator and the assistant should always wear protective glasses and protective face masks.
- If the patient wears contact lenses, the contact lenses should be taken out before treatment.
- Make sure to use sufficient suction to prevent patient from ingesting powder. Avoid long continuous use without allowing the patient to rinse. Always allow the patient to rinse regularly at appropriate times.
- Use the product in conjunction with spray water.
- Apply Vaseline, etc., to the patient's lips to prevent drying or chapping.
- Fill powder chamber with one sachet of FLASH pearl at a time. Discard any remaining powder in the powder chamber after use to avoid blockages.
- FLASH pearl is almost insoluble in water. To avoid clogging of the pipes by using FLASH pearl, regular cleaning and maintenance of suction hoses, saliva ejector and separator is necessary.

SPECIFICATIONS

• Primary components	Calcium carbonate
• Mean particle diameter	50~70μm
• Color	White grey
• Form	Spherical

OPERATION
※ Follow the instructions in the Operation Manual of the Prophy-Mate neo air polisher.

1. Connect the instrument to the handpiece tubing.
2. Open one sachet of cleaning powder and fill into powder chamber.
   ■When using FLASH pearl powder in bottles open the powder chamber and fill up to the level indicated in the above diagram (just below the end of the internal nozzle). Firmly tighten the FLASH pearl bottle cap and the Prophy-Mate neo powder chamber to avoid moisture getting to the powder.
3. After filling the powder chamber, operate the Prophy-Mate neo over the spittoon for 2 to 3 seconds to ensure good flow of powder and water before using it on the patient.
4. Use the nozzle 3 to 5mm away from the tooth surface at angles of 10 to 60 degrees facing away from the gingiva.
5. After use open the powder chamber and dispose of remaining powder to avoid contamination (moisture getting to the powder).

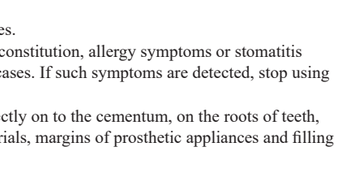

STORAGE
- NSK FLASH pearl should be stored in a cool and dry place. Protect from heat (>60°C).
- Do not use after the expiry date.

ORDER NO.
- FLASH pearl (15g x 100 sachets) Y900693
- FLASH pearl (300g x 4 bottles) Y900698

SVENSKA

Tack för att du har köpt NSK:s FLASH pearl luftpoleringspulver. Läs bruksanvisningen noggrant före användning och förvara den på en plats där den hela tiden är lättillgänglig.

AVSEDD ANVÄNDNING
Denna produkt ska endast användas av tandläkare, terapeuter eller tandhygienister.

VARNING
- Använd inte på följande patienter:
  1. Personer med luftvägssjukdomar.
  2. Personer med patologiskt djupa periodontala fickor (6 .mm eller mer) eller slemhinnelesioner.
  3. Personer med allvarliga sår i matsmältningsapparaten.
  4. Personer med nedsatt leverfunktion.
  5. Personer med lung-, hjärt- eller andningsproblem.
  6. Personer med sår, skador eller avvikelser i munhålan.
  7. Personer med hyperemi, blödningar eller inflammation i munhålan.
  8. Personer med benägenhet att utveckla inflammation eller sår i munslemhinnan.
  9. Personer med allergier.
  10. Personer som bär kontaktlinser.
  11. Beroende på patientens kroppskonstitution kan allergisymptom eller stomatit orsakas i väldigt sällsynta fall. Sluta använda produkten omedelbart om sådana symptom uppstår.
- Rikta aldrig pulverstrålen direkt mot tandcement vid tandrötterna, avkalkad emalj, fyllnadsmaterial, kanterna på proteser och fyllnadsmaterial, kronor osv.


FÖRSIKTIGHET
- Om pulver hamnar i ögonen ska det sköljas ut omedelbart med stora mängder vatten och ögonläkare ska kontaktas.
- Var noggrann med att inte låta rengöringspulvret komma in i någons slemhinneområden (ögon, näsa etc.) förutom munhålan. Skydda också ansiktet med en handduk eller liknande, eller skyddsglasögon för att förhindra att pulvret hamnar i ögonen.
- Vid användning ska både operatören och assistenten alltid bära skyddsglasögon och munskydd.
- Om patienten bär kontaktlinser ska de tas ut före behandlingen.
- Var noga med att använda tillräcklig sugkraft för att förhindra att patienten får i sig pulver. Undvik långvarig, kontinuerlig användning utan att låta patienten skölja munnen. Låt alltid patienten skölja munnen med jämna mellanrum vid lämpliga tillfällen.
- Använd produkten tillsammans med sprayvatten.
- Applicera vaselin eller liknande på patientens läppar så att de inte torkar ut eller spricker.
- Fyll pulverkammaren med en förpackning FLASH pearl i sänder. Kassera eventuellt kvarstående pulver i pulverkammaren efter användning för att förhindra stopp.
- FLASH pearl är nästan helt olösligt i vatten. För att undvika att slangarna täpps igen vid användning av FLASH pearl krävs regelbunden rengöring och regelbundet underhåll av sugslangar, salivslang och separator.

SPECIFIKATIONER

• Huvudbeståndsdelar	Kalciumkarbonat
• Genomsnittlig partikeldiameter	50~70 μm
• Färg	Vitgrå
• Form	Sfärisk

DRIFT
※ Följ instruktionerna i bruksanvisningen till luftpoleraren Prophy-Mate neo.

1. Anslut instrumentet till handstyckets slangar.
2. Öppna en förpackning med rengöringspulver och häll det i pulverkammaren.
   ■ När FLASH pearl-pulver i flaska används ska du öppna pulverkammaren och fylla upp till nivån som anges i ovanstående diagram (strax under slutet av det inre munstycket). Dra åt locket på FLASH pearl-flaskan och pulverkammaren till Prophy-Mate neo ordentligt så att det inte kommer in fukt i pulvret.
3. När du har fyllt pulverkammaren ska du köra Prophy-Mate neo över spottkoppen i 2 till 3 sekunder för att säkerställa ett bra flöde av pulver och vatten innan du använder enheten på patienten.
4. Använd munstycke 3 till 5 mm från tandytan på en vinkel på 10 till 60 grader bort från tandköttet.
5. När du har använt pulverkammaren ska du kassera kvarvarande pulver för att undvika kontamination (att fukt kommer in i pulvret).

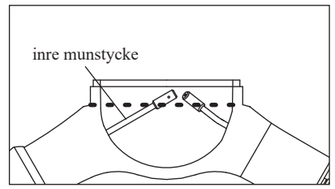

FÖRVARING
- NSK FLASH pearl ska förvaras på en torr och sval plats. Skydda från värme (> 60 °C).
- Använd inte produkten efter utgångsdatum.

ART.NR
- FLASH pearl (15 g x 100 förpackningar) Y900693
- FLASH pearl (300 g x 4 flaskor) Y900698

NORWEGIAN

Takk for at du kjøpte NSKs FLASH Pearl Air poleringspulver Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og oppbevar den på et sted der den er lett tilgjengelig til enhver tid.

TILTENKT BRUK
Dette produktet er kun til bruk for tannleger, terapeuter og hygienikere.

ADVARSEL
- Må ikke brukes på følgende pasienter:
  1. De med luftveissykdommer.
  2. De med patologisk dype periodontale lommer (6 mm eller mer) eller slimhinneskader.
  3. De med alvorlige sår i fordøyelsesorganene.
  4. De med nedsatt leverfunksjon.
  5. De med lunge- eller hjerteforstyrrelser eller nedsatt pusteevne.
  6. De som har sår, defekter eller abnormitet i munnhulen.
  7. De med hyperemi, blødning eller betennelse i munnhulen.
  8. De som har en tendens til å utvikle betennelse eller sår i munnslimhinnene.
  9. De med allergier.
  10. De som bruker kontaktlinser.
  11. Avhengig av pasientens konstitusjon kan allergisymptomer eller stomatitt oppstå i noen svært sjeldne tilfeller. Stopp umiddelbart å bruke produktet hvis slike symptomer oppdages.
- Rett aldri pulverstrålen direkte mot sementen, på tannrøttene, avkalket emalje, fyllingsmaterialer, margene på proteseapparater og fyllingsmaterialer, kroner osv.


FORSIKTIG
- Hvis du får pulveret i øynene, skyll straks med mye vann og rådfør deg med øyelege.
- Vær forsiktig så ikke rengjøringspulveret kommer inn i andres slimhinneområder (øyne, nese osv.), bortsett fra munnhulen. Beskytt også ansiktet med et håndkle eller lignende eller vernebriller eller lignende for å hindre at rengjøringspulveret kommer inn i øynene.
- Under bruk bør både operatøren og assistenten alltid bruke vernebriller og ansiktsmasker.
- Hvis pasienten bruker kontaktlinser, bør disse fjernes før behandling.
- Sørg for å bruke tilstrekkelig sug for å forhindre at pasienten svelger pulveret. Unngå lang kontinuerlig bruk uten at pasienten skyller munnen. La alltid pasienten skylle regelmessig på passende tidspunkter.
- Bruk produktet sammen med sprayvann.
- Påfør vaselin eller lignende på pasientens lepper for å hindre uttørking eller sprukket hud.
- Fyll pulverkammeret med én dose Flash pearl om gangen. Kast eventuelt gjenværende pulver i pulverkammeret etter bruk for å unngå blokkeringer.
- FLASH pearl er nesten uløselig i vann. For å unngå tilstopping av spiserøret under bruk av Flash pearl, er regelmessig rengjøring og vedlikehold av sugeslanger, spyttutkaster og separator nødvendig.

SPESIFIKASJONER

• Standardkomponenter	Kalsiumkarbonat
• Gjennomsnittlig partikkeldiameter	50~70μm
• Farge	Hvit-grå
• Form	Sfærisk

BRUKSANVISNING
※ Følg instruksjonene i brukerhåndboken til Prophy-Mate NEO luftpolerer.

1. Koble instrumentet til håndstykkets slange.
2. Åpne en pose med rengjøringspulver og fyll opp pulverbeholderen.
   ■Når du bruker FLASH pearlpulver i flasker, åpne pulverkammeret og fyll opp til nivået som er angitt i diagrammet ovenfor (rett under bunnen av den interne dysen). Stram til hetten til FLASH pearlflasken og Prophy-Mate NEO pulverkammeret godt for å unngå at pulveret blir utsatt for fuktighet.
3. Etter å ha fylt pulverkammeret, bruk Prophy-Mate NEO over spyttskjeen i 2 til 3 sekunder for å sikre at både pulver og vann strømmer fritt før du bruker det på pasienten.
4. Bruk dyse 3 til 5 mm bort fra tannoverflaten i 10 til 60 graders vinkler vendt bort fra tannkjøttet.
5. Åpne pulverkammeret etter bruk og kast det gjenværende pulveret for å unngå forurensning (ved at pulveret blir utsatt for fuktighet).

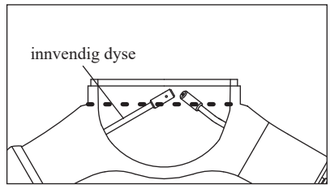

OPPBEVARING
- NSK FLASH pearl bør oppbevares på et kjølig og tørt sted. Beskyttes mot varme (>60 °C).
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.

BESTILLINGSNR.
- FLASH pearl (15 g x 100 poser) Y900693
- FLASH pearl (300 g x 4 flasker) Y900698

DANSK

Tak fordi du købte NSK's FLASH pearl air poleringspulver. Før du bruger produktet, skal du læse produktets brugervejledning omhyggeligt og opbevare den på et sted, hvor den kan konsulteres til enhver tid.


TILSIGTET ANVENDELSE
Dette produkt må kun bruges af tandlæger, tandterapeuter og tandplejere.

ADVARSEL
- Produktet må ikke bruges på følgende patienter.
  1. Personer med luftvejssygdomme.
  2. Personer med patologisk dybe periodontale lommer (6 mm eller mere) eller slimhindelæsion.
  3. Personer med alvorlige sår i fordøjelsesorganerne.
  4. Personer med leverdysfunktion.
  5. Personer med lunge- eller hjerteproblemer eller respiratorisk svækkelse.
  6. Personer med sår, skader eller abnormitet i mundhulen.
  7. Personer med hyperæmi, blødning, eller betændelse i mundhulen.
  8. Personer, der har tendens til at udvikle betændelser eller sår i mundslimhinden.
  9. Personer med allergi.
  10. Personer, der bruger kontaktlinser.
  11. Afhængigt af patientens helbred kan der i meget sjældne tilfælde opstå allergisymptomer eller stomatitis. Hvis sådanne symptomer opdages, skal du straks holde op med at bruge produktet.
- Ret aldrig pulverstrålen direkte på emaljen, tandrødderne, afkalket emalje, fyldmaterialer, protesekanter eller fyldmaterialer, kroner osv.

FORSIGTIG
- Hvis der kommer pulver i øjnene, skal du straks skylle ud med masser af vand og konsultere en øjenlæge.
- Vær meget omhyggelig med at undgå, at der kommer rensepulver ind i slimhindeområder (øjne, næse osv.) på nogen af de tilstedeværende, bortset fra mundhulen. Beskyt også ansigtet med et håndklæde osv. eller beskyttelsesbriller osv. for at forhindre, at der kommer rensepulver ind i øjnene.
- Under brug skal både operatøren og assistenten altid bære beskyttelsesbriller og beskyttelsesmasker.
- Hvis patienten bruger kontaktlinser, skal kontaktlinserne tages ud før behandling.
- Sørg for tilstrækkeligt sug for at forhindre, at patienten synker pulveret. Undgå langvarig kontinuerlig brug uden at lade patienten skylle. Lad altid patienten skylle regelmæssigt på passende tidspunkter.
- Brug produktet sammen med sprøjtevand.
- Påfør vaseline osv. på patientens læber for at forhindre, at de tørrer ud eller sprækker.
- Fyld pulverkammeret med én pose FLASH pearl ad gangen. Kassér eventuelt resterende pulver i pulverkammeret efter brug for at undgå blokeringer.
- FLASH pearl er næsten uopløseligt i vand. For at undgå, at FLASH pearl tilstopper rørene, kræves regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af sugeslanger, sekretør og separator.

SPECIFIKATIONER
• Primære bestanddele	kalciumkarbonat
• Gennemsnitlig partikeldiameter	50~70 µm
• Farve	hvidgrå
• Form	kugler

ANVENDELSE
※ Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til Prophy-Mate NEO-luftpolereren.

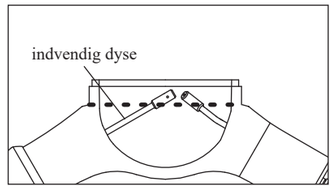

1. Tilslut instrumentet til håndstykkets slange.
2. Åbn en pose med rensepulver,og kom det i pulverkammeret.
   ■Når der anvendes FLASH pearl pulver i flasker, åbnes pulverkammeret og fyldes til det niveau, der er angivet i ovenstående diagram (lige under enden af den indvendige dyse). Luk flaskelåget til FLASH pearl og Prophy-Mate neo pulverkammeret for at undgå, at pulveret udsættes for fugt.
3. Efter påfyldning af pulverkammeret, betjen skal Prophy-Mate neo aktiveres over spyttebakken i 2 til 3 sekunder for at sikre et godt flow af pulver og vand, før du bruger detn på patienten.
4. Brug dysen i en afstand på 3 til 5 mm fra tandoverfladen i vinkler på 10 til 60 grader, der vender væk fra tandkødet.
5. Efter brug skal pulverkammeret åbnes, og resterende pulver skal bortskaffes for at undgå kontaminering (fugt til pulveret).

OPBEVARING
- NSK FLASH pearl skal opbevares på et køligt og tørt sted. Skal beskyttes mod varme (>60°C).
- Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

ORDRENR.
• FLASH pearl (15g x 100 breve)	Y900693
• FLASH pearl (300g x 4 flasker)	Y900698

SUOMI

Kiitos, että hankit NSK:n FLASH pearl -ilmakiillotusjauhetta. Muista lukea tämä tuotteen käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä opasta paikassa, josta se on helposti saatavilla milloin tahansa myöhempää käyttöä varten.


KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä tuote on tarkoitettu vain hammaslääkärien, hammashoitajien tai suuhygienistien käyttöön.

VAROITUS
- Älä käytä tuotetta seuraaville potilaille
  1. Henkilöt, joilla on hengityselinsairaus.
  2. Henkilöt, joiden ientaskujen syvyys on patologinen (6 mm tai enemmän) tai joilla on limakalvoleesio.
  3. Henkilöt, joilla on ruuansulatuselinten vakava haavauma.
  4. Henkilöt, joilla on maksan toimintahäiriö.
  5. Henkilöt, joilla on keuhko- tai sydäntoimintojen häiriö tai heikentynyt keuhkotuuletus.
  6. Henkilöt, joilla on suuontelon haava, vaurio tai poikkeavuus.
  7. Henkilöt, joilla on suuontelon hyperemia, verenvuoto tai tulehdus.
  8. Henkilöt, joilla on taipumus suun limakalvon tulehdukseen tai haavoihin.
  9. Henkilöt, joilla on allergia.
  10. Henkilöt, jotka käyttävät piilolaseja.
  11. Potilasrakenteen mukaisesti seurauksena voi erittäin harvinaisissa tapauksissa olla allergiaoireita tai suutulehdus. Jos tällaisia oireita havaitaan, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Älä koskaan suihkuta suoraan hammasjuurien sementtiin, dekalsifioituneeseen kiilteeseen, paikka-aineisiin, proteesien ja paikka-aineiden reuna-alueisiin, kruunuihin jne.

HUOMIO
- Jos jauhetta pääsee silmiin, pese jauhe välittömästi pois runsaalla vesimäärällä ja ota yhteys silmälääkäriin.
- Varo, ettei puhdistusjauhetta pääse kenenkään limakalvoalueille (silmiin, nenään jne.) potilaan suuonteloa lukuun ottamatta. Suojaa myös kasvot pyyhkeellä tai suojalaseilla jne., jotta puhdistusjauheen pääseminen silmiin estetään.
- Käytön aikana sekä käyttäjän että avustajan on aina käytettävä silmäsuojaimia ja kasvojen suojamaskia.
- Jos potilaalla on piilolinssit, ne on otettava pois ennen hoitoa.
- Varmista riittävän imun käyttäminen, jotta potilas ei joudu nielemään jauhetta. Vältä pitkäaikaista käyttöä niin, ettei potilas voi huuhdella suuta. Anna potilaan aina huuhdella suu sopivin aikavälein.
- Käytä tuotetta vesisuihkeen kanssa.
- Levitä vaseliinia tai vastaavaa potilaan huuliin niiden kuivumisen tai halkeilun estämiseksi.
- Täytä kammio yhdellä pussilla FLASH pearl -jauhetta kerrallaan. Hävitä kaikki kammiossa jäljellä oleva puhdistusjauhe käytön jälkeen, jotta tukkeutuminen vältetään.
- FLASH pearl on lähes veteen liukenematonta. Jotta putket eivät tukkeudu FLASH pearl -jauhetta käytettäessä, tarvitaan imuletkujen, syljenimurin ja eristimen säännöllistä puhdistamista ja huoltoa.

TEKNISET TIEDOT
• Ensisijaiset ainesosat	Kalsiumkarbonaatti
• Keskimääräinen partikkelien läpimitta	50~70 µm
• Väri	Valkoharmaa
• Muoto	Pyöreä

KÄYTTÖ
※ Noudata Prophy-Mate neo -ilmakiillotuslaitteen käyttöoppaan ohjeita.

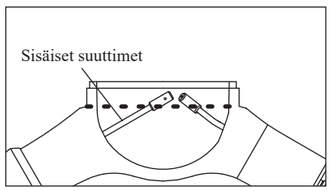

1. Liitä instrumentti käsikappaleen letkuun.
2. Avaa yksi puhdistusjauhepussi ja täytä sillä jauhekammio.
   ■ Kun käytetään pullossa olevaa FLASH pearl -jauhetta, avaa jauhekammio ja täytä edellä olevassa kaaviossa osoitettuun tasoon asti (juuri sisäisen suuttimen pään alapuolelle). Kiristä FLASH pearl -pullon korkki ja Prophy-Mate neo -jauhekammio tiukasti kiinni, jotta kosteutta ei pääse jauheeseen.
3. Kun jauhekammio on täytetty, käytä Prophy-Mate neo -laitetta 2 - 3 sekunnin ajan sylkikupin päällä, jotta varmistetaan jauheen ja veden hyvä virtaaminen ennen käyttöä potilaalla.
4. Käytä suutinta 3 - 5 mm:n päässä hampaan pinnasta 10 - 60 asteen kulmassa suunnaten poispäin ikenestä.
5. Avaa käytön jälkeen jauhekammio ja hävitä jäljellä oleva jauhe kontaminaation (kosteuden pääseminen jauheeseen) estämiseksi.

SÄILYTYS
- NSK FLASH pearl on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojaa kuumuudelta (>60 °C).
- Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

TILAUSNRO
• FLASH pearl (15 g x 100 pussia)	Y900693
• FLASH pearl (300 g x 4 pussia)	Y900698

EESTI KEEL

Aitäh, et ostsite NSK õhupoleerimisseadme pulbri FLASH pearl. Lugege see toote kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke seda kohas, kus saate seda igal ajal vaadata.


KAVANDATUD KASUTUS
See toode on mõeldud kasutamiseks ainult hambaarstide, arstide ja hügieenikute poolt.

HOIATUS
- Mitte kasutada järgmistel patsientidel.
  1. Kellel on hingamisteede haigus.
  2. Kellel on patoloogiliselt sügavad periodontaalsed taskud (6 mm või rohkem) või limaskesta kahjustus.
  3. Kellel on seedeorganites suured haavandid.
  4. Kellel on maksafunktsiooni häired.
  5. Kellel on kopsu- või südame rütmihäire või hingamisraskused.
  6. Kellel on suuõõnsuses haavad, vigastused või kõrvalekalded.
  7. Kellel on suuõõnsuses hüpereemia, verejooks või põletik.
  8. Kellel kipub tekkima suu limaskesta põletik või haavandid.
  9. Kellel on allergiad.
  10. Kes kannavad kontaktläätsi.
  11. Sõltuvalt patsiendi seisundist võivad väga harvadel juhtudel tekkida allergia sümptomid või stomatiit. Selliste sümptomite tuvastamisel lõpetage kohe toote kasutamine.
- Ärge kunagi suunake pulbrijuga otse hambajuurtele, ilma kaltsiumita hambaemailile, täitematerjalidele, proteeside ja täitematerjalide servadele, kroonidele jne.

ETTEVAATUST
- Pulbri silma sattumisel loputage kohe rohke veega ja pidage nõu silmaarstiga.
- Olge väga ettevaatlik, et puhastuspulber ei satuks ühelegi teisele limaskestale (silmad, nina jne) peale suuõõne. Samuti kaitske nägu riide või kaitseprillidega vms, et vältida puhastuspulbri sattumist silma.
- Kasutamise ajal peavad nii kasutaja kui ka assistent kandma alati kaitseprille ja kaitsvat näomaski.
- Kui patsient kannab kontaktläätsi, tuleb läätsed enne ravi alustamist eemaldada.
- Kasutage kindlasti piisavat imemist, et vältida patsiendi poolt pulbri allaneelamist. Vältige pikka pidevalt kasutamist ilma, et patsient saaks suud loputada. Lubage patsiendil alati regulaarselt sobival ajal suud loputada.
- Kasutage toodet koos loputusveega.
- Kandke patsiendi huultele vaseliini vms, et vältida nende kuivamist või lõhenemist.
- Kasutage pulbrikambri täitmiseks korraga ühte FLASH pearli kotikest. Ummistus vältimiseks visake pärast kasutamist pulbrikambrisse jäänud pulber ära.
- FLASH pearl on vees peaaegu lahustumatu. FLASH pearli kasutamisel on voolikute ummistuse vältimiseks vaja imivoolikuid, süljeimurit ja separaatorit regulaarselt puhastada ja hooldada.

TEHNILISED NÄITAJAD
• Põhikomponendid	Kaltsiumkarbonaat
• Osakese keskmine läbimõõt	50~70 µm
• Värv	Valkjas hall
• Kuju	Ümmargune

KASUTAMINE
※ Järgige Prophy-Mate neo õhkpoleerimisseadme kasutusjuhendis olevaid suuniseid.

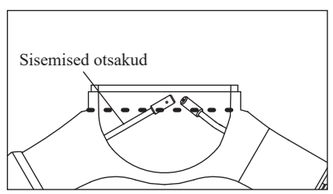

1. Ühendage instrument käsiseadme voolikuga.
2. Avage puhastuspulbri üks kotike ja täitke sellega pulbrikamber.
   ■ Pudelis oleva pulbri FLASH pearl kasutamisel avage pulbrikamber ja täitke kuni ülemisel joonisel näidatud tasemeni (vahetult sisemise otsaku otsa allosani). Kinnitage FLASH pearli pudeli kork ja Prophy-Mate neo pulbrikamber kindlalt, et vältida niiskuse sattumist pulbrisse.
3. Pärast pulbrikambri täitmist kasutage seadet Prophy-Mate neo 2 - 3 sekundit süljekausi kohal, et tagada pulbri ja vee hea vool enne seadme patsiendil kasutamist.
4. Kasutage otsakut hambapinnast 3 - 5 mm kaugusel 10 - 60-kraadise nurga all, suunates selle igemest eemale.
5. Pärast kasutamist avage pulbrikamber ja visake allesjäänud pulber ära, et vältida saastumist (niiskuse sattumist pulbrisse).

HOIUSTAMINE
- NSK pulbrit FLASH pearl tuleb hoiustada jahedas ja kuivas kohas. Kaitske seda kuumuse eest (> 60 °C).
- Mitte kasutada pärast aegumiskuupäeva.

TELLIMISNR
• FLASH pearl (15 g × 100 kotikest)	Y900693
• FLASH pearl (300 g × 4 pudelit)	Y900698

NAKANISHI INC.
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan
NSK Europe GmbH EC REP
Elly-Beinhorn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany
NSK America Corp.
1800 Global Parkway, Hoffman Estates, IL 60192, USA
Visit our website

Specifications are subject to change without notice.
2023-02-22